

歯石及び着色の除去



歯列不正



根面露出



デブライドメント



急性期ポケット内のイリゲーション



メンテナンス時におけるスケーリング



◎写真の製品は実寸大です。

スーパーソニックスケーラー「サリー」だから
痛みを軽減したSRPが行えます。

スーパーソニック・スケーラー

サリー

Super Sonic Scaler SALLY

快適な歯石除去はサリーからはじまります。

患者さんが嫌がる不快な振動音を大幅カット*。

*当社製品比



快適1


歯面への刺激と痛みを抑えて

患者さんに優しいルートブレーニングが可能に。

従来のミクロン社製エアースケーラーに比べチップ先端の最大振幅を約1/3*に抑制。

このため、痛みの少ない治療とともに歯面への影響を最小限にしました。しかもスーパーソニックだから効率の良いスケリングが行えます。

*当社製品比

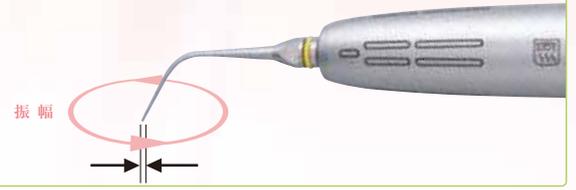

快適2

タービンホースに接続するだけ。だから、煩わしいセッティングは一切いりません。




快適3

処置面の比較でわかる

歯面にやさしいスーパーソニックスケラー・サリー。

歯石が除去され、歯面に損傷のないことが認められます。

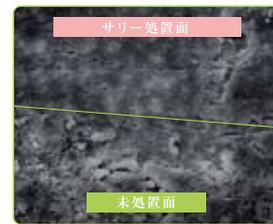

*電子顕微鏡写真提供：日本大学歯学部 歯周病学講座

快適4

クイックオペチカジョイント



クイックジョイント



各社ユニット用アダプターもご用意しています。

標準装備チップ

標準価格：各7,000円

*チップの大きさは原寸大

TTL 1



オールマイティタイプ

TU 02



歯石が多いケースに効率的

TRP 1



5~8mmの歯周ポケット用

TES



根近接部、歯間近接部、歯列叢生部用

オプションチップ

標準価格：各7,500円

*チップの大きさは原寸大

TTL 1D



多量の歯石除去用

TZ 01



頑固なヤニ、ステイン除去用

TRP 2



8~10mmの深い歯周ポケット用

根管洗浄用チップもご用意しています。

根管内に残った切削粉などをスーパーソニックの力できれいに洗浄。

サリー用ホルダーH03セット 標準価格：12,400円

(Uファイル用チャック0.8φ、ホルダー、レンチA)

*Uファイルは別売となります。



ご使用のチップは摩耗していませんか？

チップ消耗ガイドでご確認ください。



◎SALLY●接続方式：クイックオペチカジョイント接続●全長（チップ含まず）：105mm

●重量：74g●標準価格：186,000円

◎SALLY ST●接続方式：クイックジョイント接続●全長（チップ含まず）：111mm

●重量：80g●標準価格：186,000円

◎SALLY M●全長（チップ含まず）：111mm●重量：80g●標準価格：186,000円

◎SALLY・SALLY ST・SALLY M共通仕様

●振動数：14,000Hz以上（パワー調整リングにより調整可能）及び使用するチップによる

●空気手元圧力：0.3MPa●一般的名称：歯科用エアースケーラー●認証番号：21400BZZ00149000（管理特管）

●付属品：スケリングチップ4本（TTL1/TU02/TRP1/TES 各1本）、専用レンチ1個、チップカバー1個、チップ消耗ガイド1枚

ユニットから供給されるエアと水で駆動するため、電磁波によるペースメーカーに対する影響がありません。

※本製品の仕様など、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。価格は2018年12月現在。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

発売元/  株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp>

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL:0120-178-148(コンタクトセンター)

●製造販売元：株式会社ミクロン 東京都大田区東雪谷1-34-14



(01)02747937011720

C01619/2018年12月/PRO/20/©20/改