



Contour type / Step type

[ノバ セリオ カンタータイプ / ステップタイプ]



プラス
シンプル+ でいこう。

いろんな機能を必要に応じてカスタマイズ
それが「ノバセリオ」

プラス シンプル+でいこうノバセリオ。



いろいろプラス

Contour type

カンタータイプ 2型

「環境を考えたらできるだけ省エネを意識したいんです!」

それならLED无影灯がありますよ。

「お年寄りがなるべく楽に座っていただけるようなシートはないですか?」

3層構造のウレタンを採用した

ふっかふか
Fukka-Fukaシートをチョイスしてみても。

こんなふうに自分の想いを細かくカスタマイズできる、

親しみやすくまじめなユニット「ノバセリオ」。

きっと欲しいユニットが見つかりますよ。

「誠実」っていう意味の「セリオ」を
名前に付けた、とても使いやすい工夫が
されてるユニットのことだよ

①

ノバセリオって
なに?



柔らかいすわりごち!

ずっと座っていたい

ふっかふか
Fukka-Fukaシート

※オプション装着

※写真はオプション装着例です。

「ノバ セリオ」はカンタータイプとステップタイプ、2種類のチェアタイプと

1型・2型・3型・フライングと4種類のテーブル設置方法、計8種類からチョイスできます。

さらにLED無影灯やFukka-Fukaシート、シートカラー、パネルカラー、各種インスツルメントなど
オプションを含め、さまざまな想いをカスタマイズできます。



Step type

ステップタイプ 1型

「子どもの患者さんが多いから院内を明るくしたいんです!」

シートを含めたカラーチョイスが豊富ですよ。

「すこし狭いけれど患者さんの導入をスムーズにできないかな?」

ベースマウントタイプは

テーブルがすっぽり後方におさまるから導入が楽ですよ。

そんなふうに自分の好みでセレクトできるのも、

親しみやすくまじめなユニット「ノバ セリオ」だから。

きっと使いやすいユニットが見つかりますよ。

2

後方におさまると
何が良いの?

テーブルがじゃまにならないから
患者さんをスムーズに導入
することができるんだよ

※写真はオプション装着例です。



チェアの後方に
すっぽり収まる
ベースマウントテーブル

プラス

無影灯にLED+でいこうノバセリオ。



Step type

ステップタイプ 1型

「来院された患者さんとコミュニケーションを大切にしたいんです!」

ミラーパネル採用LED無影灯「ルキオン12」を
3
チョイスしてみても。

こんなふうに自分の想いを細かくカスタマイズできる、
コミュニケーションもらくらくユニット「ノバセリオ」。



3

患者さんとのよりよい
コミュニケーションって?

治療の説明を
さらにわかりやすく
できることだよ

※写真はオプション装着例です。

インフォームドコンセントが
スムーズに行えるLED無影灯
「ルキオン12」

※オプション装着
届出番号:08B2X00001000006(一般)

全面にミラーパネルを採用。

前面にミラーパネルを採用したことにより、患者さんにより直接的な説明をすることができます。顔全体が映るので歯の色合わせや確認が容易です。



交換可能なフラットミラーパネル。

凹凸の少ないシンプルな構成は清掃しやすくいつも清潔に保つことができます。また表面はハードコーティングされているので、傷がつきにくくなっています。



「ノバ セリオ」には2つのLED無影灯が加わりました。

ミラーパネル採用のLED無影灯「ルキオン12」と「ルキオン24」。

新しい光が診療の幅を広げます。

コミュニケーションを重視した12灯モデルと、より明るさを求める診療のための24灯モデル。



Contour type

カンタータイプ 3型

「インプラントなど手術が多いので

もっと明るく口腔内を照らしたいんです!」

LED無影灯「ルキオン24」をチョイスしてみてもいいかな。

4

「ルキオン12」からさらに明るくなり、無影効果も高まります。

無影灯の光まで好みで

セレクトできるユニット「ノバ セリオ」。



4

「ルキオン24」
って何?

明るくて影の
出にくい
LED无影灯だよ

※写真はオプション装着例です。



外科用にも使える
LED无影灯
「ルキオン24」

※オプション装備

届出番号:08B2X00001000006(一般)

24個のLEDがさらに無影効果を高めます。


色々な角度から光が入るので、口腔内をさらに明るく照らします。

優れたデザイン性とバランスのよい操作性。

3軸構造で治療のときも、患者さんに説明するときもすばやく移動、スムーズに操作できます。

シリコングリップ・ノータッチセンサー採用。

取っ手部分のシリコングリップはオートクレーブ対応です。ノータッチスイッチでON/OFFでき、院内を清潔に保てます。

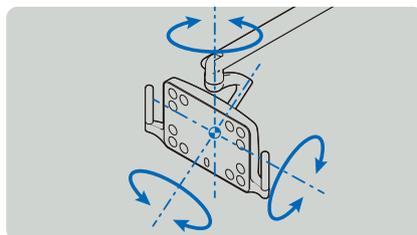

シリコングリップ

ノータッチセンサー

フライング・システムで快適診療。 軽くスムーズなインスツルメントの操作感。



軽いタッチでインスツルメントを操作できるフライングアーム機構により、快適な診療が可能になりました。

ヨシダのこだわり抜いたフライングアームユニットです。

インスツルメントハンガーの胸上配置はもちろん、さまざまな診療ポジションに対応可能です。

バランス式アーム(標準装備)とロック式アーム(オプション装備)の2種類のフライングアーム機構をご用意。


● バランス式アーム (標準装備)

インスツルメントを軽くスムーズに扱えますので、長時間診療もラクラクです。



● ロック式アーム (オプション装備)

ロック機構でホースが自由になるため、インスツルメントを軽く動かすことができます。

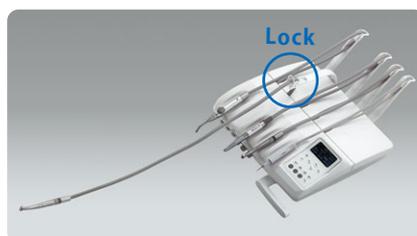

テーブル上下にいっぱい動きます。

上下可動幅を570mmと広くしました。立位も座位も、診療ポジションに合わせてテーブルを配置できます。



「ノバセリオ」には
フライングアームタイプも
ありますよ。

Flying System

フライング・システム



5

フライング
アームって？


インスツルメントの
重さを感じずに診療ができる
アームシステムだよ

※写真はオプション装着例です。




750mmの引き出しストローク。

750mmのロングストロークが治療中の操作感を
高めます。余裕のストロークがインスツルメントの
把持のしやすさを確保します。

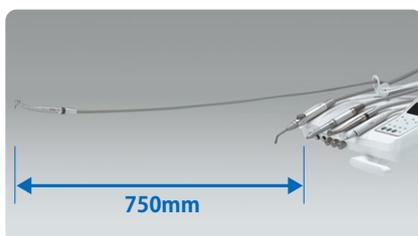

ドクターテーブルの取付位置が選択可能。

ドクターテーブルの位置は、3つからお好みに応
じてチョイスできます。

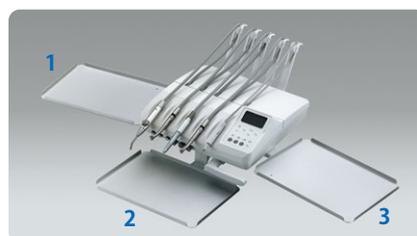

メンテナンスが容易です。

テーブル上面カバーの分割ラインが少なくメンテ
ナンスが容易です。またインスツルメントハンガーは
滅菌可能なので、テーブルまわりを清潔に保てます。



患者さんにあわせた適正ポジションがカンタンに。

ノバセリオは電動ヘッドレストをオプション搭載可能。ヘッドレスト調整の煩わしさから解放されます。標準搭載のヘッドレストも無理なく開口できる頸椎保持型で、患者さんに合わせて簡単に位置付けできます。

Headrest

ヘッドレスト



6

電動ヘッドレストの
役割って?

治療中にカンタンに
ヘッドレストの調整ができるんだよ
手術にも便利だね



電動ヘッドレスト(オプション装備)で診療中、先生と患者さんどちらも優しい姿勢を保てます。


電動ヘッドレストならチェアを寝かせた状態でも簡単に位置づけを変更できます。ノバセリオは背板スイッチと足元のフットコントローラー2カ所で調整できるので、治療を止めずにさらにラクな診療を可能にします。

無理なく開口できる頸椎保持型ヘッドレスト(標準装備)。

頸椎から頭部をしっかり保持して無理なく開口できます。2軸動作で長時間の治療時にも患者さんの疲労を軽減します。

上顎の診療ポジション

下顎の診療ポジション

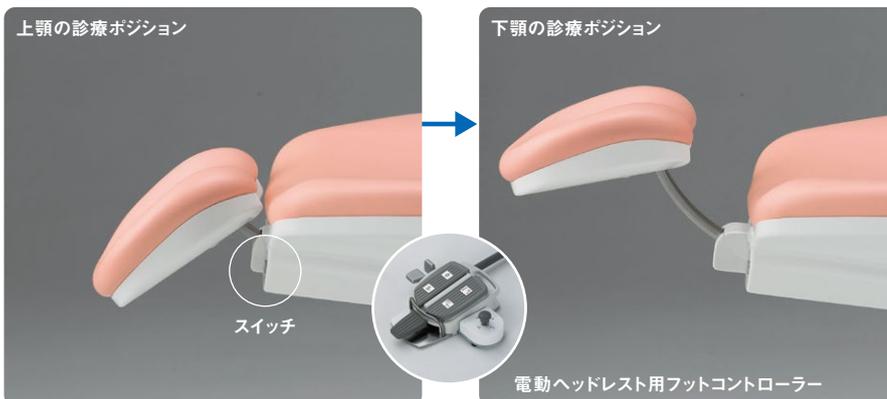

スイッチ

電動ヘッドレスト用フットコントローラー



ふっかふか

患者さんが喜ぶ快適シート、Fukka-Fukaシート。

患者さんにやすらぎと安心感をもたらす、やさしい質感。

まるでソファのようなすわりごちのシートです。高級ソファのような外観が院内に落ち着いた雰囲気を作り出します。

7

Chair

チェア



7

ふっかふか
Fukka-Fuka
シートって？

3層構造のウレタンを使用した
とっても座り心地のいいシートだよ



薄型バックレストが
足元のスペースを確保。


薄型バックレストの採用で、ドクターの足元のスペースに余裕を与え、口腔内へのアクセスを容易にします。

長時間治療を可能にする
スーパーソフトシート（標準装備）。

スーパーソフトシートの柔らかな触感で、患者さんをやさしく包み込みます。標準シートも伸縮性に優れ、十分柔らかいシートです。

患者さんをやさしく包み込む
ふっかふかシート（オプション装備）。

驚くほど柔らかな座りごちで、患者さんをやさしく包み込みます。長時間座っていても疲れにくいよう、硬さの異なる3種のスポンジを合わせています。

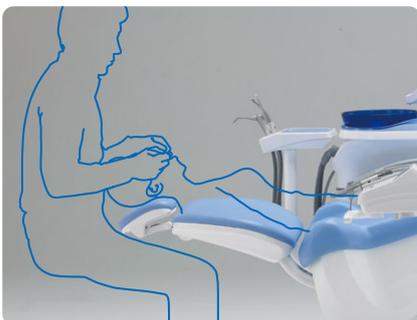

前面スイッチでユニットをコントロール。

使い勝手を考えて、マイクロモーター回転数のコントロールやチェア停止ボタン、ビルトイン超音波スケーラーのペリオモードスイッチなどをテーブル前面に集中配置しました。

8

Doctor Table

ドクターテーブル



8

前面
コントロールって？

診療に重要な操作を
テーブルの前面スイッチで
コントロールできるシステムだよ



便利な前面スイッチで

さまざまな機能をコントロールできます。

マイクロモーター回転数のコントロールスイッチやメモリースイッチ、スプレー／エア調整など、手元で操作するスイッチをテーブル前面に配置しました。



スケーリングのための

P(ペリオ)モードを装備(オプション装備)。

超音波スケーラー(超音波スケーラー)用の機能。スイッチをオンにするだけで優しいタッチのスケーリングが行えます。



手術中など、チェアの動きを

ロックしたいときに便利です(標準装備)。

インプラントの手術など、チェアを誤って動作させないためのチェア停止スイッチ。安全性を考えた機能です。



インスツルメントをカンタン接続。

タービンはもちろん、歯面清掃器、根管拡大洗浄器など、さまざまなインスツルメントをワンタッチで接続可能なジョイント、クイックジョイントシステムが効率のよい診療をサポートしますよ。

9

Instruments

インスツルメント



9

クイック
ジョイントって？

治療に必要なインスツルメントを
ワンタッチで接続できる
ジョイントのことだよ

治療の信頼性をさらに高める
数々のインスツルメントをご用意しました。



光付3方向注水タービン

●JF-ONE SLP-9000BX-F (標準装備)

●認証番号:220AKBZX00164000(管理医療機器 特定保守管理医療機器)



LEDライト対応タービンハンドピース

●スカイロードSDC1 (オプション装備)

●認証番号:218AKBZX00116000(管理医療機器 特定保守管理医療機器)



クイックエアスケラー・根管拡大・洗浄装置

●ルーティ560LUX-Neo (オプション装備)

●認証番号:20700BZZ00045000(管理医療機器 特定保守管理医療機器)



スーパーソニックスケラー

●サリー (オプション装備)

●承認番号:21400BZZ00149000(管理医療機器 特定保守管理医療機器)



歯面清掃器


●クイックジェットM (オプション装備)

●承認番号:21900BZX00750000(管理医療機器)




チップエアを標準装備。

チップエアを装備。フットコントローラーのボタン操作で、シリンジに持ちかえることなくミラーの曇りなどを解消できます。

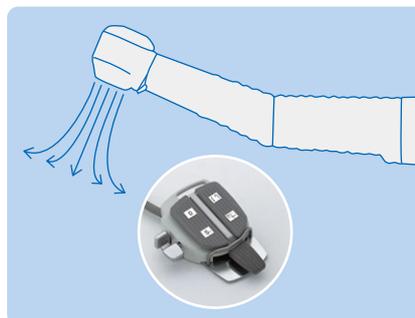

ノーバックシステム(タービン逆流防止回路)

タービン使用時の逆流を防止。

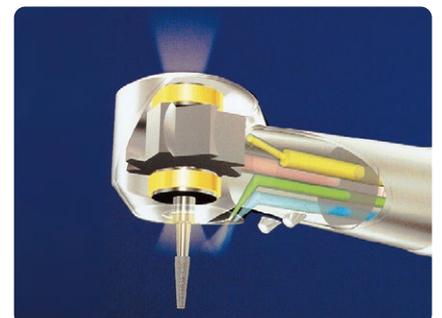

プライベートスペースをトータルに演出します。

パーティション長1,840mmでチェアを寝かせた状態でも、隣の患者さんから見えることなくプライベートスペースを演出。¹⁰
 パーティション・チェアシート・ユニットカバーのカラーコーディネートがトータルで行えます。



10 プライベートスペースの重要性って？

他人に自分の口の中が映ってるモニターを見られたらいやでしょ？
 治療もプライバシーが必要なんです



コンパクトなベースマウントタイプ。

導入・退出を妨げない、ベースマウントテーブル。チェアの後方にテーブルが配置できるので、後導入にも対応。お好みのユニットレイアウトが可能です。



テーブル可動範囲の拡大で快適な診療ポジション。

後方配置のテーブルアームにより、テーブルの可動範囲が拡大。テーブルは300mm幅で上下にも動くので、症例に合わせて診療ポジションがとれます。



トータルでカラーコーディネートが可能(オプション装備)。

パーティション・PCボックスにオプションカラーをご用意しています。ユニットカバー・チェアシートとのカラーコーディネートができます。



ユニットバリエーションとカラーバリエーション

●ユニットバリエーション

	カウンタータイプ				ステップタイプ			
	ベースマウント	カート	オーバーアーム	フライング	ベースマウント	カート	オーバーアーム	フライング
シート	ノーマルシート 	●	●	●	●	●	●	●
	ふっかふかシート (オプション装備) 	●	●	●	●	●	●	●
LED無影灯	ルキオン12 (オプション装備) 	●	●	●	●	●	●	●
	ルキオン24 (オプション装備) 	●	●	●	●	●	●	●
ヘッドレスト	ノーマルヘッドレスト 	●	●	●	●	●	●	●
	電動ヘッドレスト (オプション装備) 	●	●	●	●	●	●	●
セリオパーテーション 	●	●	●	●	●	●	●	●

●コーディネートカラーバリエーション

ガラス鉢 (標準装備) **スピットトレイ** (標準装備)

ガラス鉢: クリアー, ブルー, コップトレイ: クリアー, ピンク, グリーン, イエロー, レイクブルー

テーブル (オプション装備)

ドクターテーブル: クリアー, ピンク, グリーン, イエロー, レイクブルー

アシスタントハンガーテーブル: クリアー, ピンク, グリーン, イエロー, レイクブルー

ユニットカバー (オプション装備)

グリーンメタリック, ブルーメタリック, ボルドーメタリック, ブラックメタリック, シルバーメタリック, ブラウンメタリック, ベビーピンク

チェアカラーカバー (オプション装備)

グリーンメタリック, ブルーメタリック, ボルドーメタリック, ブラックメタリック, シルバーメタリック

●シートカラーバリエーション

ノーマルシートカラー (標準色)

ブラック, ピーチピンク, スノーホワイト, ダークブルー, ウォーターブルー, アップルグリーン, サマーイエロー

ノーマルシートカラー (オプション)

グリーンメタリック, ブルーメタリック, ボルドーメタリック, ブラックメタリック

ふっかふか Fukka-Fukaシートカラー

フレンチベージュ, リッチブラック, イタリアンレッド (特注色)

※ふっかふか Fukka-Fukaシートは特注色も合わせて全13色ございます。

もっとあるよ、いろいろな機能。



Good Point

さまざまな特長

テーブルエリアからスピットンまわり、そしてチェア。

ドクターには効率的な治療のサポートを、患者さんには心地よく治療を受けていただくために。

Table & Spittoon ●テーブル&スピットンエリア

シンプルで操作のしやすい操作パネル。
見やすいVFD表示モニター(オプション装備)。

シンプルで機能的なデザインの操作パネルで、効率的なユニットコントロールを行えます。
またマイクロモーターの回転数表示やタイマーの設定状況などを表示するVFD表示モニターをオプションにて設定できます。

マイクロモーターの最高回転数を
UL・L・M・Hの4種類で設定できます。

使用するハンドピースやバーに合わせてお好みを選択できます。



横スライド踏み込み式
フットコントローラ。


操作のしやすい横スライド踏み込み式フットコントローラ。マイクロモーターの回転数制御が容易に行えます。

使いやすい
テーブル型アシスタントハンガー。

バキューム、排唾、3WAYシリンジ、パネルスイッチを標準装備。テーブル型で小物を置けます。

LEDライトが
コップを置く位置をガイド。

LEDガイドがコップの置き位置をおしゃれにガイドします。

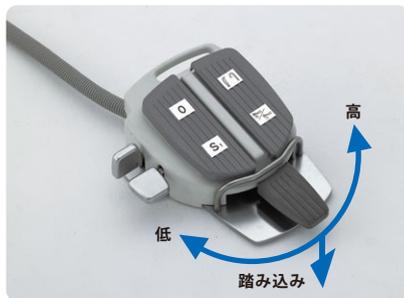

Chair ●チェアエリア


ステップ付きで患者さんの足を安定。
●ステップタイプチェア

ステップがついているので、心理的に安心して治療を受けていただけます。

こちよい座り心地で患者さんを包み込む、
お年寄りから子供まで乗り降りしやすいカンタータイプ。 ●カンタータイプチェア

バケット型のカンターチェアが腰回りのホールド性を確保し、患者さんの身体をやさしく包み込みます。

当社ユニットでいちばん低い最低位380mmを実現。小児から高齢の方まで、ラクに乗り降りが可能です。

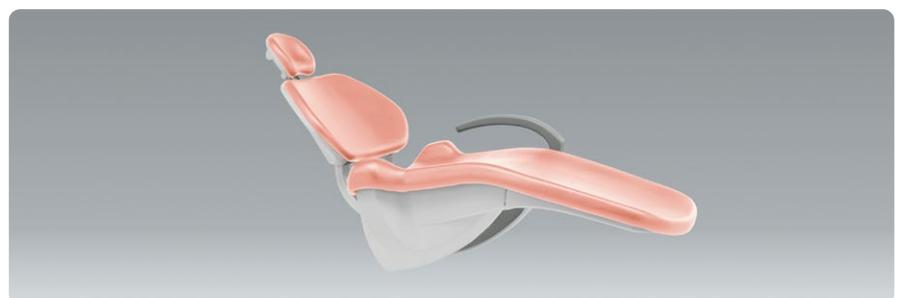

まだまだあるよ、オプションの数々。

診療の幅をさらに広げるさまざまな機能。

用途に合わせて数々のオプションをご用意しました。



Option
オプションアイテム

Instrument ●インストルメント

光付きマイクロモーター
マイクロモーター ジェーエフワン40DS-LUX
●認証番号:21000BZZ00052000
(管理医療機器 特管)



ワイドレンジマイクロモーター
マイクロモーター 40H
●認証番号:21700BZZ00045000
(管理医療機器 特管)



エキスパートマテック
E10C
●認証番号:223AIBZX00039000
(管理医療機器 特管)



エキスパートマテック
E20C
●認証番号:223AIBZX00039000
(管理医療機器 特管)



エキスパートマテック
E20L
●認証番号:223AIBZX00039000
(管理医療機器 特管)



YWハンドピース
型式S7-40MLX
●認証番号:219AKBZX00160000
(管理医療機器 特管)



超音波スケーラー
ブチビエソ
●認証番号:220ACBZX00050000
(管理医療機器 特管)



- マイクロモーター回路増設
[40DS/40H]
- タービン回路増設
- タービンハンドピース
[JF-ONE全シリーズ]

Table/Chair Area ●テーブル/チェア

パラマシャーカステン/S型(フライングシステムは除く)



デンタルシャーカステン(フライングシステムは除く)



マウス・テンキー置き(マウス単独も可能)



ガスバーナー/GB-IIβ-1



インストルメントカバー(フライングシステム)



タテ型ハンガー(フライングシステムは除く)



テーブルモニター(フライングシステムは除く)



- エアワンタッチジョイント
- 電動式安頭台
- タービン回路増設
- ドクター側アームレスト
- ドクターテーブル&アシスタント
ハンガー用カラートレー
・ブルー・ピンク・グリーン・イエロー

Other ●その他のオプション


フットコントローラー/930型



ディスプレイアーム/ボールタイプ



2ハンド用アシスタントハンガー

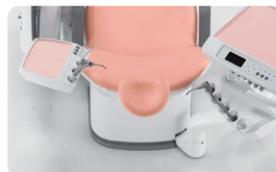

ティッシュボックス



セバマチック



電動ヘッドレスト用フットコントローラー



- オペレーティングライト調光機能
- 給水ボトル



プラス
シンプル+でいこう。
ノバセリオ

●仕様・型式

◎商品名:ノバセリオ◎チェアタイプ:カンタータイプ/ステップタイプ◎電源:AC 100 V 50/60Hz◎消費電力:1.5kVA

●標準装備

◎タービン1回路:JF-ONE SLP9000BX-F◎マイクロモーター1基:40C[内部注水]◎マイクロモーターハンドピース:S7-40M1/S7-40S1◎トリプルシリンジ:S型シリンジ2基◎シリコンホース

◎バキューム:セントラル方式◎排唾:セントラル方式◎オペレーティングライト:無影灯G型ライト◎フットスイッチ:横スライドS型◎コップ給水:水量感知式オートカラン

◎感染防止ノーバックシステム◎チップエアール◎チェアアームレスト[アシスタント側]◎ヘッドレスト:頸椎保持型◎ガラススピットン鉢[クリアー/ブルー]

●販売名/◎ノバセリオ:1型/ベースマウントタイプ・2型/オーバーアームタイプ・3型◎一般的名称:歯科用ユニット◎認証番号:220AKBZX00104000(管理 特管 設置)

◎ノバセリオ フライングシステム◎一般的名称:歯科用ユニット◎認証番号:223AKBZX00182000(管理 特管 設置)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

◎発売元:



〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2941(機械部)

<http://www.yoshida-dental.co.jp>

製造販売元:吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔660



2014年8月/PRO/50/@160/改 (01)02747937012857