

●インスツルメント

LEDライト対応タービンハンドピース
LUNASUS1 (標準装備)

●認証番号: 219ABBZX00148000 (管理 特管)



光付きマイクロモーター (標準装備)
マイクロモーター 40DS-LUX

●承認番号: 20900BZZ00110000 (管理 特管)



等速用光付きマイクロモーターハンドピース
YW SV 40MLX (標準装備)

●認証番号: 219AKBZX00160000 (管理 特管)



等速用光付きマイクロモーターハンドピース
エキスパートマテックE20L (オプション装備)

●認証番号: 223AIBZX00039000 (管理 特管)



光付き超音波スケーラー
プチピエゾII (オプション装備)

●認証番号: 220ACBZX0005000 (管理 特管)



等速用マイクロモーターハンドピース
YW SV 40SI (標準装備)

●認証番号: 219AKBZX00160000 (管理 特管)



等速用マイクロモーターハンドピース
エキスパートマテックE10C (オプション装備)

●認証番号: 223AIBZX00039000 (管理 特管)



ワイドレンジマイクロモーター
マイクロモーター 40is-LUX

●承認番号: 227AOBZI00008000 (管理 特管)



歯科用ガス圧式ハンドピース
EXタービン

●認証番号: 228AKBZX00060000 (管理 特管)



タービン回路増設
(オプション装備)

●テーブル

マウス置き (テンキーも設置可能)
(オプション装備)



テーブルモニター
(オプション装備)



ガスバーナー/GB-II β
(オプション装備)



●その他のオプション

S型フットコントローラー
(標準装備)



フットコントローラー/930型
(オプション装備)



セバマチック
(オプション装備)



55型フットコントローラー
(オプション装備)



マイクロスコープ搭載
(オプション装備)



GRASYS


グラシス

●選べるカラー

ノーマルシート



Fukka-Fuka (ふっかふか)シート

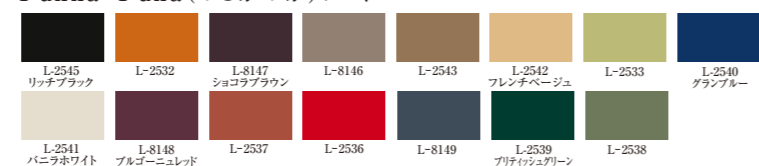

ユニットカバー



発売元: 株式会社 **354** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0120-178-148 (コンタクトセンター)

製造販売元: 吉田精工株式会社 〒311-3506 茨城県行方市八木薨660

●一般的名称: 歯科用ユニット ●販売名: U11ユニット ●認証番号: 226AKBZX00015000 (管理 特管 設置)

※グラシスの販売名は「U11ユニット」です。

※本カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。また色調は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。



(01)02747937014264

2019年12月/PRO/10/@80/改

GRASYS

グ ラ シ ス

患者様を想い、ドクターを想い、
このユニットは生まれました。

「GRAND」+「ANESYS」
— GRAND

それはギリシャ語で「おおきな」。

— ANESYS

それは「安心」。

堂々とした存在。

それは、人に安心感を与えます。




快適さがもつ安心感。

操作性と機能がもたらす快適さ。それは、先生や患者様にストレスを与えません。
追求された快適さは、安全を担うだけでなく、安心感を生み出します。


単独チルティング機能 楽な姿勢で受診

患者様に安心感を与える、
単独チルト機能を搭載しています。
バックレストを寝かさず、チェア全体が最大23度傾斜します。
背中とお腹の負担が少なく、
ご高齢の患者様や妊婦の方でも安楽ポジションで
治療を受けられます。

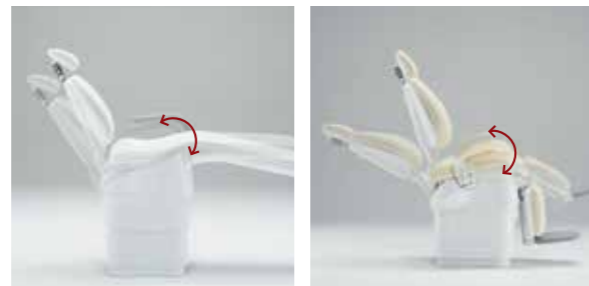


ワイドシート 肩サポート

患者様がお座りになるシートは、
ゆったりとしたシートへ。
従来機種と比較し[※]、座面幅で20mm・
バックレスト幅は40mm広くなっています。
座って待っている間も治療中も
ゆったりとした座り心地でリラックスして頂けます。
※当社比

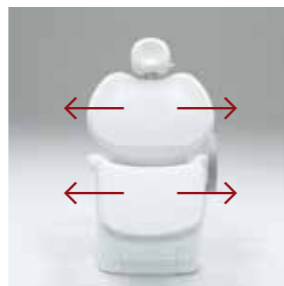

立位にも対応 最高位820mm

最低位400mm、最高位820mmと
ストローク幅が拡張。
様々な診療ポジションに対応でき、
立位の水平診療も可能に。
無理な姿勢になることなく、
自然な姿勢で診療できます。

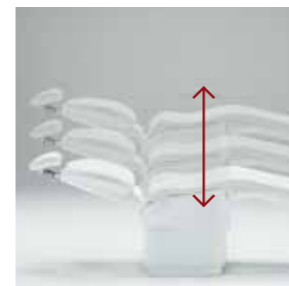

バックレスト スライド機能

80mmの調整幅でスライドさせることで、
患者様に合わせた居住性をご提供します。
小学生のお子様から
高身長の方までサポートします。
寝たときに最も体圧のかかる肩甲骨付近を
優しくサポートします。

(オプション)



ふっか ふか Fukka-Fuka シート

やさしい質感は、患者様に
やすらぎと安心感を与えます。
柔らかさの異なる3層構造だから、
驚くほど柔らかな座りごちで、
長時間座っていても疲れにくく、
患者様をやさしく包み込みます。




カウンタータイプ

ステップタイプ

ユニバーサル ヘッドレスト

患者様の治療部位に合わせて、
左右に角度調整が可能です。
患者様に無理に横を向いていただくことなく
調整が可能なため、
患者様にストレスを与えません。
(オプション)

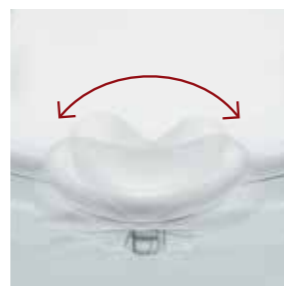

サポートハンドル

高齢の患者様や足腰の不自由な患者様のために
転倒防止用のサポートハンドルを装備しました。

ステップタイプのみ



安
心

おおきな
「GRAND」

+

安心
「ANESYS」

GRASYS

グ ラ シ ス



容易な機能が創り上げる安定。

それは、これまでの操作性と機能性を更に高めること。それは、ドクターの診察や治療時の安定したよりよい環境を創ります。その安定した環境は、治療中の患者様の気持ちの安定にも繋がります。

■ テーブル



テーブル、アシスタントハンガーテーブル、ユニットトップ、スピットンの各部分はフラットなデザインで統一。機能性はもちろん、有機ガラスを採用しユニット全体の質感も高めています。シンプルさと清掃性にも考慮しました。



■ タッチパネル

大型の液晶タッチパネルは、押している力に反応する感圧式。使いやすさにも配慮し、ユニットの状態に応じて必要な機能のみを表示させることでシンプルにしました。シンプルな操作性でストレスなく診療に集中頂けます。



■ ハンガーチルト機能

インスツルメントを配置するハンガーはテーブルから独立。水平方向に回転します。単独で上下チルト機構も搭載し、先生の診療ポジションに合わせて配置可能です。インスツルメントの持ち替えてストレスを感じることなく、患者様の口腔内に集中できます。



■ マイクロスコープ搭載可能

グラシスはライトボールにマイクロスコープ「プリマDNT Nuvar」を搭載することができます。先生が求める拡大視野下での歯科治療を省スペースで実現できます。



■ アシスタントハンガー

バキューム、排唾、シリンジのホルダーは着脱式。オートクレーブ滅菌が可能です。日常的に使う部分も清潔に保つことができ、安心してお使い頂けます。使いやすさを配慮し、それぞれの配列はお好みに合わせて入替えも可能です。

安
定



クリーンな環境が生み出す、安全。

細部にまでこだわることで、患者様へ安らぎを。先生には安穩を。
グラスにに関わる全ての人へ、これまでにない安堵を。




回転式スピットン

スピットン(鉢洗い)は、
患者様の正面まで回転し、
楽な姿勢でうがいが可能です。
オプションで自動回転(電動)式も
お選び頂けます。



バキューム クリーニングシステム

バイオクリーンの薬液投入後、希釈、
吸引を自動サイクルで行います。
バキューム回路をきれいに保ち、
詰まりを防止することができます。
バキュームフィルターは
アシスタントハンガー部にあり、
毎日の清掃も簡単に行えます。

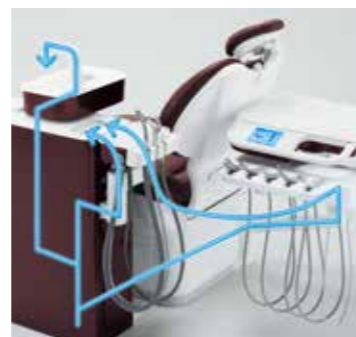

フラッシング機能

口腔内に入る全てのインスツルメント類と
コップ給水の滞留水を
自動サイクルで排出します。
サイクル終了後にバルブを自動で閉じるので、
水の無駄遣いを防止できます。
簡単な操作で、
水回路をクリーンに保ちます。



ドクターと患者様。
ユニットを使用される方々のことを
思い、考える。
ドクターへは、機能性と快適性を。
患者様へは、安らぎと安心感を。

細部にまで技術を施し、
生まれてくるユニットは
そんな想いをカタチにしたものです。

このチェアユニットは、
診療空間を演出するだけでなく、
安らぎと調和を生みだします。