

優れた吸収力と毛羽たちにくさが自慢の

不織布ガーゼ


# デンタルガーゼ




## 吸液性比較試験

傾けた台に置いた布に着色した生理食塩水を注入して吸液性能を比較。  
(傾斜角度:45度 注入量:8mL 注入速度:8mL/5秒)

デンタルガーゼ 使用不織布

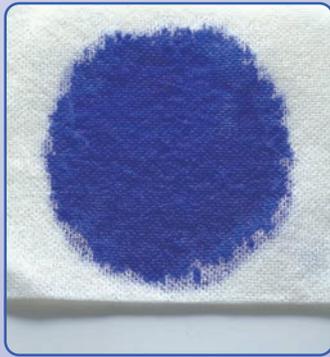

コットン不織布

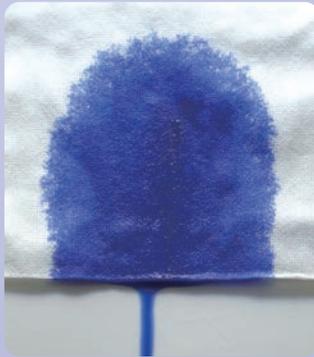

レーヨン/PET不織布




綿ガーゼ



- 綿ガーゼの約**2倍**の吸収力で、抜歯後や外科処置の止血用としてご使用ください。
- セルロース\*で**連続繊維構造**(切れ目のない繊維)。
- ガーゼ表面・カット面の毛羽たちや脱落繊維が少なく、外科処置時の軟組織にやさしく、ガーゼ除去時に違いが分かります。また、**リーマ等の清掃時に繊維が付くことが少なくなります。**

\*セルロースとは、高等植物の細胞壁の主成分で、地球上に最も存在量が多い有機物です。植物の骨格をなす成分として主要な役割を果たしており、紙・パルプ・衣料用繊維など工業的にも広く利用されています。

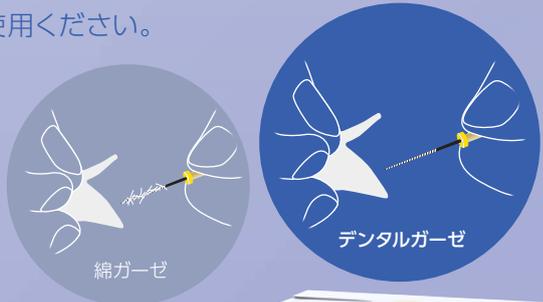

### 不織布ガーゼ デンタルガーゼ

5×5cmで二連綿花容器にスッポリ入る便利サイズ。



サイズ: 15×10cm (6折) 1箱: 100枚入×6包

- ・デンタルガーゼ(滅菌済)青箱 標準価格: **3,000円**
- ・デンタルガーゼ(未滅菌)赤箱 標準価格: **2,400円**

### 不織布ガーゼ デンタルガーゼ 4×4 (未滅菌)

4×4cmで操作性がよく、経済的です。

サイズ: 4×4cm 1箱: 1,920枚

・デンタルガーゼ 4×4 (未滅菌) 白箱 標準価格: **1,500円**



### 不織布ガーゼ 不織布ロールガーゼ 10mタイプ

デンタルガーゼと同じ素材の不織布ガーゼです。用途に応じてお好みのサイズに切ってご使用ください。

サイズ: 幅30cm×長さ10m 標準価格: **600円**



◎販売名:デンタル・ガーゼ EOG 滅菌済(青) ◎一般的名称:医療用不織布 ◎届出番号:13B2X10098000002(一般) ◎製造販売元:小津産業(株)東京都中央区日本橋3-6-2  
◎販売名:デンタル・ガーゼ(赤) ◎一般的名称:医療用不織布 ◎届出番号:13B2X10098000001(一般) ◎製造販売元:小津産業(株)東京都中央区日本橋3-6-2

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2019年2月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●取扱店

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0120-178-148**

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 ± 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937016824

●発売元: 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

C02115/2019年2月/SO/30/@10/新