



EXCEED

fx

PREMIUM

SERIES

| エクシード エフェックス プレミアム シリーズ |

YOSHIDA



調和と機能性が奏でる、プレミアムステージへ。

おもてなしの気持ちをチェアに託した、エフェックス[プレミアム]が誕生。

さらなる快適性、機能性の向上を通して、人とチェアの調和を追求します。

EXCEED

fx series

PREMIUM

エクシード エフェックス プレミアム シリーズ



動きを感じさせない、というクオリティ。


お一人おひとりに対応できる、くつろぎの機能を搭載。
チェアが動いている気配さえ感じさせない静けさ、穏やかさで、お迎えします。

— プレミアムサイレントムーブメント機構

機械音や振動を抑える設計。チェアの動作がさらに静かに、そしてなめらかに。
治療への緊張感をやわらげます。

— スロースタート&スローストップ

ゆっくり動き始め、ゆっくり停止するというやさしい動作が、スタートやストップの際に
感じるショックを大幅に軽減。チェアの動作スピード・時間をご希望のままにコントロールでき、特別なおもてなしを体感いただくことができます。

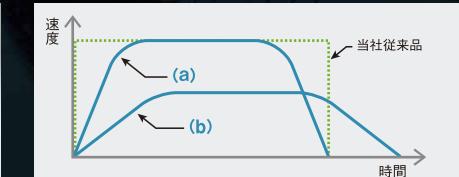

「最高速度」「最高速度に達する時間」を設定できます。
(a) スローで動作する時間が短く、動作スピードが速い。
(b) スローで動作する時間が長く、動作スピードが遅い。

— ロイヤルスロー

治療状況に応じた、デリケートなコントロール。
マイクロスコープ使用時に、術視野を見逃さずフォーカス調整することができます。



ひとを想う、機能。


座り心地から居心地まで考慮した多彩な機能。
お一人おひとりに合わせて、優しく包みます。
心身ともに緊張をやわらげるおもてなしを。

EXCEED
efx
PREMIUM



最低位を40cmに設定

公園のベンチに腰掛けるように、自然に座れる高さ。ステップを取り除くことで、これから時代に適したバリアフリー設計を実現しました。

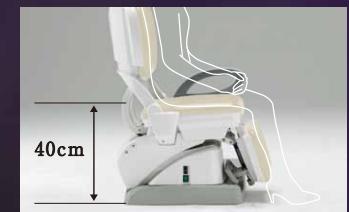

背板上下機構

身長に合わせてスライド調整。患者様を心地よく包み込みます。



頸椎保持型ヘッドレスト

頸椎をサポートすることで、開口しやすくなり、術者も患者様もストレスなく治療できます。



頭部ズレ防止機構

チェアが寝起きしてもヘッドレストが患者様の頭部をしっかりとレストします。



アンクルフラップ

足首をやさしくサポート。リラックスでき、しかも脚が開かず、女性も安心です。





流れるような動きを。

患者様とチェアが融合。

さまざまな動きの調和がもたらすやさしさ。

緊張をやわらげる自然な姿勢へスムーズに導きます。



“M”






電動ヘッドレストとチェアの同調。

ヘッドレストとチェアがシンクロして動き、無理なくスムーズに、治療ポジションへと導きます。

— チェアの常識を変える、
パーソナルな対応。

体格に合わせてポジションを設定。
患者様とチェアが一体となってスムーズ
に動き、ノーズニー位置と頸椎保持
姿勢をキープ。
速やかに治療へと移行できます。

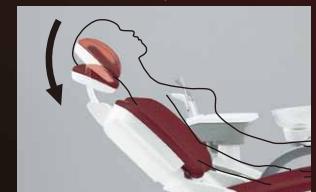

ヘッドレストのフィット感を
さらに高める機能をプラス。

ヘッドレスト背面とフットコントローラにスイッチを設置。簡単にポジションの微調整が行え、フィット感や安定感をより一層高めます。





空間演出のおもてなし。

リラックスして治療を受けられる、ほどよい遮蔽性。

コミュニケーションツールがアシストする、揺るぎない信頼感。

スペースを有効に活用し、想いのままの空間演出を実現します。

EXCEED
fx
PREMIUM
CREDO





想い描くイメージを自由にデザイン。

術者の動きから電源や配線まで考慮したキャビネット。
使いやすく、見た目も美しい治療空間を演出します。



ディテールにもこだわりを。

オプション仕様のカバー型インストルメントハンガーには、
カラーバリエーションをご用意しました。



最新のシステムをコンパクトに凝縮。

わずか2,300mmの設置スペースに、デジタルツールを効率よくセッティング。
細部にまで計算された収納のアイデアが、コミュニケーション環境をすっきりと整備します。

— 電源周辺

マウスなどの機器がキャビネット上部で接続できるよう、電源ポートとあわせて、USBポートも2口設置。
モニターコードがすっきりと配線できるよう工夫しました。



— パソコン周辺

パソコン設置スペースは、キャビネット右側に。適切な位置に設置された電源ソケットや配線穴によって、コード類もすっきりと収納できます。



— テーブル周辺

キャビネットテーブルの下も、収納スペースとして有効利用。ドクターテーブルやオプション仕様のモービルキャビネットがぴったりと収まるよう、設計されています。





さらなるおもてなしを求めて。

まず、その姿が美しいこと。

そして、品格を感じる、上質な心地よさ。

患者様への想いから生まれた高級感が

今、豊かなひとときをお届けします。

EXCEED
efx
PREMIUM
| Fukka-Fuka |



ワンランク上の心地よさ。

まるで、オーダーメイドのソファ
に腰掛けたようなグレード感。
座り心地にこだわった3段階の
クッション設計で、治療時の身体
的な疲れはもちろん、精神的な
ストレスもやわらげます。



チェアをエレガントにドレスアップ。

efXプレミアムシリーズ全機種に、Fukka-Fuka(ふっかふか)シートの装備が可能。快適性にゴージャスな質感が加わり、患者様が指定したくなる心地よさを実現します。



センターFukka-Fuka(ふっかふか)シート



センター標準シート

※ドクター側アームレストはオプションです。
※写真はオプション装着例です。

e f X CURE ITEM

Function

「T-ポジション」で咬合を診る。



リラックスポジション

リラックスポジションは、まるでソファーに座っているようなリラックスした姿勢を再現できます。



T-ポジション

自然な咬合を再現する「T-ポジション」。リラックスポジションから背板をさらに起こしています。患者様が椅子に通常座っている姿勢と同じ姿勢で、術者は咬合を診ることができます。



T-ポジション(チェア単独上昇)

チェアが単独で上昇するように設計していますので、背の高い術者でも腰を曲げることなく、患者様の咬合平面を術者の視線の高さに合わせて診ることができます。

e f X CURE ITEM

Sky road SDC1/LumiLED4000

★はオプションです。

パートナーシップを究めた、性能。

目覚ましい進化を遂げる、最新の技術を搭載したセレクト・アイテム。スピーディかつセイフティな治療を、力強くサポートします。

スカイロードSDC1

- 出力27Wの切削パワーを発揮。
- 軸がプレににくいスマーズな回転を促すセラミックペアリングを採用。
- バー全体へ注水するマルチジェットスプレーで飛散を抑え、切削効率をアップ。
- 明るく広い照視野を確保するLEDライトに対応。

販売名:スカイロード
一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース
医療機器認証番号:218AKBZX00116000(管理医療機器 特管)



より自然に明るく、立体的に。

色温度を4,000Kに設定し、自然な色調と立体感のある照射視野を確保。より適確な施術をサポートし、ドクターの目の疲れをやわらげます。

ルミレッド4000

- 2灯のLED搭載で、最大照度を50,000Luxまでアップ。
- 左右257個×2のファセット入り反射ミラーで、高い無影効果を実現。
- 180mm×90mmのくっきりとした楕円状照明エリアで、口腔内を照射。
- ハロゲン球に比べて寿命が長く、消費電力も1/5に削減。
- 3つの回転軸とヘッドの軽量化で、操作がさらにスマーズに。
- 8段階の調光機能で、8,000Lux～50,000Luxまで照度を調節。

販売名:ルミレッド
一般的名称:汎用歯科用照明器
医療機器届出番号:13B1X00133000035(一般医療機器)



e f X CURE ITEM

Table / Spitter / Other

★はオプションです。

動きに応じて、フレキシブルに対応。ドクターのテクニックを支える、進化した装備。

ドクターテーブル



テーブルに取り付けられる液晶モニタースタンド
※写真では17インチ液晶モニターを装着



テーブル周辺でマウス等の操作を可能にする
UBS端子を装備。



ホルダー部分に20度の傾斜を持たせることで
インスツルメントを取り出しやすくなるとともに、
手当たりを防ぎます。



ユニット搭載型超音波スケーラー
ブチエゾ
医療機器認証番号:220ACBZX00050000



Pモードスイッチ
ワントッチ切換で、ペリオモードの使用が可能。
健康なセメント質や象牙質を傷つけずに、
デブリメントが行えます。



ワイドレンジマイクロモーター+
光付きマイクロモーターハンドピース
40HS-LUX+YWハンドピースS40MLX
(40HS-LUX)医療機器承認番号:21700BZ00045000
(YWハンドピースS40MLX)
医療機器認証番号:219AKBZX00160000

◎インスツルメントホース:耐薬品性と柔軟性を両立させた材質でエタノールでの清拭が可能です。

衛生面も考慮した、機能的なデザイン。

スピットンエリア



大きなガラス鉢を動かし、楽な
姿勢でうがいができる回転式
スピットン。



ガラス鉢部分は取り外して洗う
こともでき、いつも清潔な状態が
保てます。

フットコントローラ

標準フットコントローラ オプションフットコントローラ



ターピンやマイクロモーター等のインスツルメントの回転数を制御します。
踏み込む位置や加減により、適正にコントロール。

e f X CURE ITEM

Chair / Color

選べるカラーバリエーションで、個性が光ります。

標準シートカラー



ブルーメタリック グリーンメタリック ダークブルー ボルドーメタリック シャンパンホワイト ブラックメタリック

優美なフォルムに映える、全15色がラインアップ。

ふっかふかシートカラー



バニラホワイト リッチブラック



フレンチベージュ L-2543 L-8146 ショコラブラウン L-2532 L-2536 L-2537
ブルゴーニュレッド L-2533 L-2538 ブリティッシュグリーン L-8149

美しいカラーで、空間に彩りを。

ベースカラー



ベースカラー:クリアグリーン



ベースカラー:クリアホワイト

技術と感性が響き合うコンツェルト。

[エクシード エフェックス プレミアム] シリーズ



EXCEED
efx
PREMIUM
“M”

| エクシード エフェックス プレミアム エム |
※写真はオプション装着例です。

快適性と利便性を両立させた、
シンクロナイズドモーター・ヘッドレストを搭載。
患者様の動きに合わせたポジションへと誘導し、
よりスムーズな治療への移行を可能にします。



EXCEED
efx
PREMIUM

| エクシード エフェックス プレミアム |
※写真はオプション装着例です。



EXCEED
fx
PREMIUM

CREDO

エクシード エフェックス プレミアム クレド

※写真はオプション装着例です。
モニター、モービルキャビネットは別売です。

より良い治療環境を創造する、
サポートシステム。
格調高いフォルムに豊かな機能を備えた
エクシードのフラッグシップユニットです。

治療ユニットとデジタル機器対応キャビネットを
バランスよく融合。
プライベート空間も確保し、
診療とコミュニケーションを完結させます。



YOSHIDA

発売元: ^{株式会社ヨシダ} 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2941(診療機器部)

製造販売元:株式会社吉田製作所

*本カタログに掲載の商品写真はオプション装備仕様です。*モニター画面は、はめ込み合成です。

*本カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。また色調は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

販売名／エクシードef X:1型・5型 ○一般的の名称:歯科用ユニット(管理医療機器)○医療機器認証番号:220AKBZX00108000

販売名／TB30チェア ○一般的の名称:歯科診査・治療用チェア(一般医療機器)○医療機器届出番号:13B1X00133000026

販売名／TN29ライト ○一般的の名称:汎用歯科用照射器(一般医療機器)○医療機器届出番号:13B1X00133000022



(01)0274793709383

2011年11月/PRO/100/@440/新