

ノゾミをかなえる

CREST NEO

【クレストネオ】



患者さんに心地良い治療を提供したい
できるだけスムーズに治療を行いたい

そんないろいろなノゾミ
クレストネオが
かなえます



ノゾミをかなえる
CREST
NEO
【クレストネオ】

ハズミ
その1



より快適な診療を行いたい



Crest
Neoが
かなえます



充実の装備で
快適な治療がより身近に

すぐれた操作性と拡張性を兼ね備えた、ユニットの新しいスタンダード「 Crest Neo」。
お求めやすい価格設定ながら、充実した機能でよりスムーズな治療を行っていただくことが可能です。

ハズミ
その2



患者さんにもっと快適に
治療を受けてほしい

CHAIR


【チェア】

クレスト
ネオが
かなえます



大切なのは患者さんの安心感。
快適な座り心地で患者さんをやさしく包みます。

利用者を問わない心地よい治療空間を提供します。

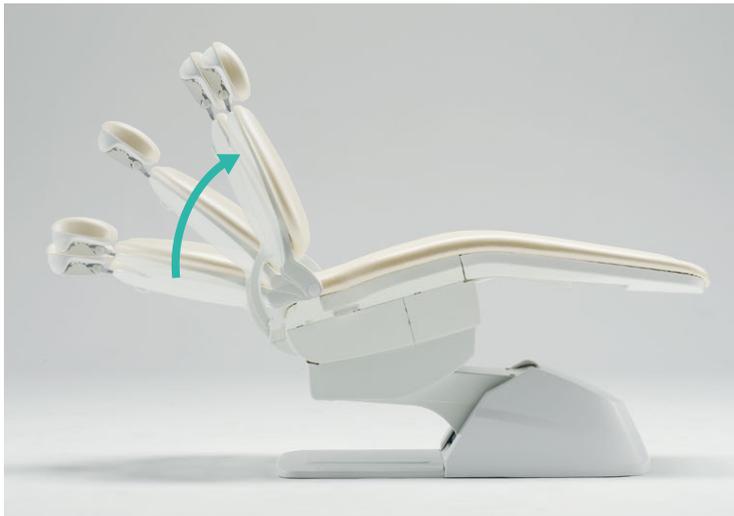

ゆっくり動き、
ゆっくり止まる
やさしい動作のおもてなし

スロースタート・スローストップ機構

チェア一動作停止時の動きが静かで、スタートやストップの際に感じるショックを大幅に軽減しました。患者さんの治療への緊張感を和らげます。さらに動きによって高級感も与えられます。



患者さんに
優しいポジションを保てます

最低位380mm 最高位750mm

お子様から老人まで乗り降りしやすい高さ。
治療時に先生が無理にかがまなくても良い自然な高さに調節が可能です。



2軸ヘッドレスト

2軸可動式のため、患者さんに合った頭の角度に調節可能。患者さんの頸椎角度に合わせられるため、長時間の診察にも疲れません。開口もしやすくなり、診療効率も上がります。

患者さんも
安心ね！



OPTION オプション選択でより上質な空間を



※写真はオプション装備例です。



Fukka-Fuka (ふっかふか) シート

驚くほど柔らかな座り心地で、患者さんを優しく包み込むFukka-Fuka(ふっかふか)シート。豊富なカラーバリエーションから空間イメージにあったカラーをお選びください。

ハズミ
その3



もっと操作性の良い ユニットで治療にのぞみたい

TABLE

【テーブル】

クレスト
ネオが
かなえます



さらに使いやすくなった操作性で
理想の治療スタイルにまた一歩ちかづきます。

充実した標準装備で、より高品質な治療が提供できます。



高い操作性で
ポジションを問わない
診療が可能に

正面左右にハンドル装備

どの診療ポジションでも、テーブル移動が容易に行えます。
また、術者が、無理な姿勢を取ることなくテーブルの移動ができ、
身体的ストレスを与えません。



標準搭載した自然な明るさで
スムーズな治療をサポート

LED無影灯とハンドピースLED照明

口腔内の照射視野を格段にアップさせ、ドクターのスムーズな
治療をサポートするため無影灯をはじめ、タービンにもLEDを
標準搭載しています。自然に明るく、立体的な照射視野を確保
し、常に診療しやすい視野を先生の手元へ提供します。



使いやすさが
重要だね!

シンプルながら操作性を追求した信頼性の高いテーブルまわり。



最小限のテーブルパネルスイッチ

ボタンを最小限の機能に抑えることで、操作される方が、どなたでも迷うことなくユニット操作が可能。治療の際のストレスを軽減できます。



操作しやすい側面スイッチ

側面にスイッチ類をレイアウトすることで、インストルメントごとの微調整が可能になり、診療効率がより向上します。



機能的なスピットンエリア

ガラス鉢は着脱可能でお手入れも簡単です。



**CREST
NEO**

【 Crestネオ 】

OPTION 豊かな拡張性が先生の診療スタイルをサポートします。

跳ね上げ式 アームレスト	回転式 アームレスト	内部注水光付ワイドレンジ マイクロモーター 40HS-LUX 認証番号:21700BZZ00045000	光付マルチウエイシリンジ マルチウエイシリンジ 3-Lux-LED 届出番号:13B1X00133Z00024	フットコントローラー 踏み込み式フットコントローラー	超音波スケーラー プチピエゾ 認証番号:220ACBZX00050000

COLOR 豊富なカラーリングで、個性的に診療空間をコーディネート。

<p>標準シート 標準色</p> <p>シャンパンホワイト ブルーメタリック グリーンメタリック ダークブルー ボルドーメタリック ブラックメタリック</p>	<p>Fukka-Fuka (ふっかふか) シート ※オプションです。</p> <p>バナナホワイト リッチブラック フレンチベージュ L-2543 L-8146 ショコラブラウン L-2532 L-2536 L-2537 ブルゴニュレド グランブルー L-2533 L-2538 グティッシュグリーン L-8149</p>
--	---

標準装備

- 仕様・型式
- ◎チェアタイプ:カンタータイプ ◎電源:AC100V 50/60Hz ◎電源入力:900VA
- 標準装備
- ◎タービン1回路:スカイロードSDC1 ◎マイクロモーター1基:40C[内部注水] ◎マイクロモーターハンドピース:YW S7 40MI-40SI
- ◎トリプルシリンジ:マルチウエイシリンジ3-ST(Dr側)
- ◎バキューム:セントラル方式 ◎无影灯:クラネスライトLED ◎フットスイッチ:横スライド型 ◎コップ給水:オートカラタイマー式
- ◎感染防止ノーバックシステム◎ヘッドレスト:頸椎保持型
- 販売名/◎ Crestネオ ◎ 一般的名称:歯科用ユニット ◎ 認証番号:226AKBZX00058000(管理 特管 設置)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

取り扱い店名

※当カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により予告なく変更する場合があります。また、掲載商品の色調は実際の商品の色と異なる場合があります。

◎ 発売元: 株式会社 **ヨシダ**
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2941 (診療機器部)
<http://www.yoshida-dental.co.jp>
◎ 製造販売元:株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



2014年6月/明/50/@80

(01)02747937012741