

YOSHIDA

タービンハンドピース
ウインドロード H1

Turbine Handpiece

Windroad H1

軽やかに吹き抜ける風のように。
軽いタッチの切削感「ウインドロードH1」。



24Wのハイパワーで軽やかで力強い切削力を実現。
ヘッドサイズや角度など洗練されたデザインによるスムーズな臼歯部の切削感。
コストパフォーマンスと性能に優れた「ウインドロード H1」。

より使いやすさとメンテナンス性を高めた 高コストパフォーマンスモデル「ウィンドロード H1」。

取替が簡単な交換式カートリッジ。

有資格者によるカートリッジ現地交換が行えます。メンテナンス重視のコンセプトで日々の治療をスムーズに行えます。




カートリッジ交換キット

カートリッジ交換時に水回路の清掃が行えます。

最大出力24W。力強い切削が可能。

スムーズな切削を可能にする最大出力24Wの切削パワー。ハンドリングの良さと相まって確かな治療が行えます。

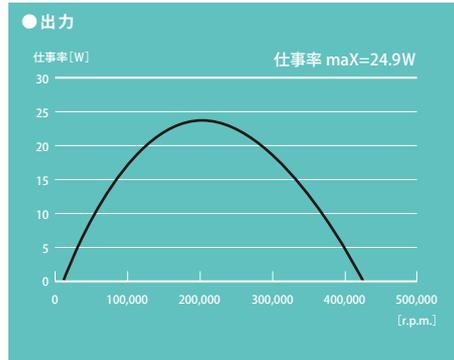


滅菌耐久性能がアップ。

ボールベアリングとOリングの改良により、従来機種より滅菌耐久性が向上しました。クラスN, クラスS, クラスBサイクルの滅菌器に対応。

59dBA。パワフルな回転と静音性を両立。

パワフルな回転にも関わらず、騒音レベルを59dBAと低騒音化を実現。患者さんが不快と感じる金属音を低減しています。

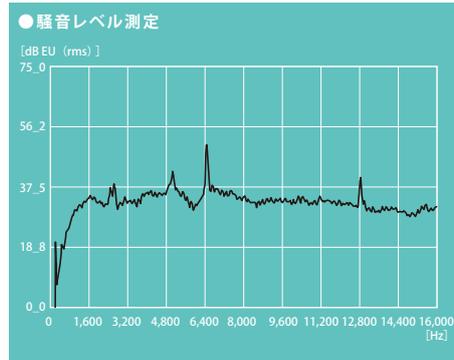

バーへの確に注水。4方注水。

4方注水により、バーに確実に注水することができ、切削効率をアップします。



タービンハンドピースのメンテナンスに

ハンドピース自動洗浄・注油システム

フレッシュケア

1本のタービンをわずか30秒で自動クリーニングと注油。洗浄・注油は人の手によるメンテナンスは差が出てしまいます。フレッシュケアなら、強力・正確・スピーディに洗浄・注油ができます。

◎仕様

- 本体寸法:
W280×D295×H300mm
- 重量:5.9kg
- 電源:AC100V 50/60Hz 25VA
- エア:0.4~0.6Mpa
- 標準価格:238,000円



ハンドピース用洗浄・潤滑剤

ヨシダスプレー


ヨシダスプレー3本セット

- ◎セット内容:
- ヨシダスプレー 3本
- タービン用
ノズルスライド式 緑 1個
- マイクロモーターHP用ノズル ピンク 1個
- チャック用ノズル 黄 1個
- エアスケラ・STジョイントタービン用ノズル 1個
- 標準価格:19,000円
- ヨシダスプレー交換用
- 標準価格:5,500円




チャック機構の剛性アップ。

応力集中部位の設計を見直し、チャック機構の剛性を大幅にアップ。安全で確実なバー保持を実現しました。

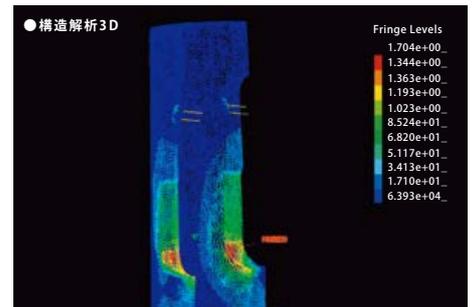

バー引き抜きによるチャック力の変化

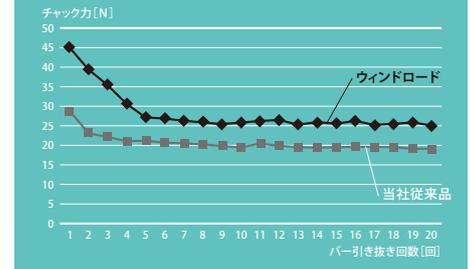

●一般名称:歯科用ガス圧式ハンドピース ●販売名:ウィンドロード ●認証番号:224ACBZX00073000(管理 特管) ●標準価格:125,000円

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2016年1月現在。

●お問い合わせは下記まで

禁断転載

