

# NOVA SEASONS

ノバ シーズンズ

とっても明るい ☺ 季節がやってきた。



カウンター 2 型 (オーバーアーム)  
※オプション装着例です。

ちょっとずつバージョンアップすればいいんです。そのための「シーズンズ」ですからね。

## Option Item ●オプションインストルメント・チェア・テーブル・スピットンエリア

もっと便利にする、もっとみんなを笑顔にするオプション。

診療の幅をさらに広げるさまざまな機能。用途に合わせて数々のオプションをご用意しました。

### オプション／インストルメント

光付きマイクロモーター  
●ジェーエフワン 40DS-LUX



一般的名称：歯科用電気回転駆動装置  
認証番号：21000BZZ00052000 (管理 特管)  
製造販売元：吉田精工 (株)

光付 5 倍速マイクロモーターハンドピース  
●YW SV200MLX



一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース  
認証番号：219AKBZX00160000 (管理 特管)  
製造販売元：株式会社製作所

光付マイクロモーターハンドピース  
●YW SV40MLX



一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース  
認証番号：219AKBZX00160000 (管理 特管)  
製造販売元：株式会社製作所

PMTC サブソニックシステム  
●ユリー



一般的名称：歯科用エアスケーラ  
認証番号：226AKBZX00111000 (管理 特管)  
製造販売元：(株) スズケン

エアスケーラー・根管拡大・洗浄装置  
●ルーティー 560-YL-Neo



一般的名称：歯科用エアスケーラ  
認証番号：20700BZZ00045000 (管理 特管)  
製造販売元：(株) スズケン

エアスケーラー  
●サリー



一般的名称：歯科用エアスケーラ  
認証番号：21400BZZ00149000 (管理 特管)  
製造販売元：(株) スズケン

超音波スケーラー  
●フチビエゾⅡ (光なし)



一般的名称：歯科用多目的超音波治療器  
認証番号：220ACBZX00050000 (管理 特管)  
製造販売元：(株) 吉田製作所

超音波スケーラー  
●ニュートロン (光なし)



一般的名称：歯科用多目的超音波治療器  
認証番号：224ALBZX00038000 (管理特管)  
製造販売元：白水貿易 (株)

### オプション／チェア／テーブル／スピットンエリア

ヘッドレスト  
●ユニバーサルヘッドレスト



無影灯  
●ルキオン 12/24



ティッシュボックス  
●ライトボール取付ティッシュボックス



アシスタントハンガー  
●ハンガーヘッドレスト部取付



フットコントローラ  
●930 型



フットコントローラ  
●横スライド踏み込み式



スピットン  
●陶器製スピットン (左から・うす皿・青磁・瑠璃)



## Sheet Color ●シートの種類とシートカラー

※シートカラー数はオプションを含めた数です。実際の色調と異なる場合があります。ご了承ください。

標準シート 10 色、ふっかふかシート 15 色をご用意しました。デンタルオフィスのデザインに合わせてお選びいただけます。

### ノーマルシート

標準色



ブラック



ピーチ  
ピンク



スノー  
ホワイト



ダーク  
ブルー



ウォーター  
ブルー



アップル  
グリーン



サマー  
イエロー

オプション色



グリーン  
メタリック



ボルドー  
メタリック



ブラック  
メタリック

●仕様・型式○商品名：ノバ シーズンズ○電源：AC100V50/60Hz ○消費電力：1.5kVA ○チェアタイプ：カウンター 1 型(ベースマウント)・2 型(オーバーアーム)・3 型(カート) / 前折れステップ 1 型(ベースマウント)・2 型(オーバーアーム)・3 型(カート)  
●標準装備○タービン 1 回路：ルナサス 1 ○マイクロモーター 1 基：40C [内部注水] ○マイクロモーターハンドピース：SV-40MI / SV-40SI ○トリプルシリンジ：905 シリンジ 1 基  
○シリコンホース○バキューム ○排唾：セントラル方式 ○オペレーティングライト：無影灯 L 型ライト (HI) ○フットスイッチ：横スライド S 型 (チェア作動 SW なし) ○コップ給水：光センサー / タイマー式  
○水除菌フィルタ [ユニポア] ○チェアアームレスト [ユニット側] ○ヘッドレスト：頸椎保持型  
●販売名 / ○ノバ シーズンズ ○一般的名称：223AKBZX00047000 (管理 特管 設置)

※当カタログに掲載の商品仕様および価格 (2017 年 12 月) は、改良等により予告なく変更する場合があります。また、掲載商品の色調は実際の商品と異なる場合があります。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで



### オプション

各回路を毎日洗浄  
フラッシングボール



フラッシング機能で各給水回路から残留水の自動排出が可能です。  
フラッシングボールをセットし、各ホースをボール内に接続。  
ボタン操作で簡単にフラッシング作業を行うことができます。



カウンター 2 型 (オーバーアーム)  
※オプション装着例です。



3 型 (カート)  
※オプション装着例です。

YOSHIDA

明るい、軽やか、シンプルなユニットです。

ユニットバリエーションは、チェア2種、テーブルタイプ3種

計6バリエーションからお選びいただけます。

# NOVA SEASONS

ノバ シーズンズ



カンター 1型(ベースマウント)  
※オプション装着例です。



前折れステップ 1型(ベースマウント)  
※オプション装着例です。



前折れステップ 2型(オーバーアーム)  
※オプション装着例です。

標準仕様で必要な装備は搭載。

そのうえでもっと便利なアイテムはオプションで設定。

標準仕様のままでもみんなの笑顔があふれるユニットを作りたい。

そんな気持ちを込めて誕生したユニット「ノバ シーズンズ」。

あたらしい仲間もふえてよりいっそう選びやすくなりました。

さあ、みんなのとっても明るい季節がはじまりますよ。

さまざまな  
インストルメント類をご用意



光付インストルメントを各種ご用意。術視野をいっそう明るく自然に確保し、常に安定した診療を行えます。


— 一部オプション —

乗り降りしと診療姿勢を考えた  
最低位 380mm・最高位 700mm



小さな子供や老人、体の不自由な患者さんが乗り降りをスムーズに行えるように、また楽な姿勢で診療が可能な最低位380mm/最高位700mmに設定しました。(カンタータイプ)

ノーズニーポジションで  
患者さんに安心感とリラックスを

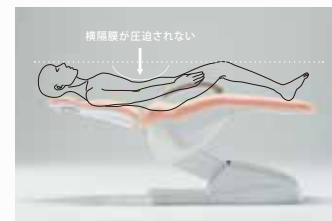

ノーズニーポジションは横隔膜が圧迫されず呼吸が楽にできるポジション。患者さんの鼻と膝が同じ高さになることでリラックスできる体勢を作ります。

自然な明るさで  
口腔内状況を視認できます



口腔内を自然な明るさで照らすLED無影灯。診療中の口腔内状況、例えば出血時でも治療部位が判別しづらくなるよう設計されています。

ハンガー体型の  
コンパクトなドクターテーブル



コンパクトなハンガー体型のドクターテーブルを採用。診療中のハンドリングを考慮したデザイン。一体型なのでメンテナンスが容易です。

— 一部オプション —

シンプルで使いやすい  
操作パネル



シンプルで使いやすい操作パネル。ピクトグラムボタンでチェアの動きやハンドピースの制御、メモリー機能にアクセスします。

清潔感溢れる  
洗口エリア



陶器製の鉢を採用した洗口エリア。排唾等で汚れやすい鉢のメンテナンスを容易にします。