

# 日本のハイジニストのためにプロデュース。




歯面・歯周組織へのダメージをより小さく!!  
そのための器具選びも重要です。

歯面・歯周組織へのダメージをより少なくするMI(低侵襲治療)を心がける時代となりました。  
また患者さんの定期的なメンテナンス時にはよりデリケートなケアが必要ということも定着してきました。  
私たちはこれらの時代に合った治療や考え方を取り入れていかなければなりません。  
そしてそれらが実現できる器具を選択することもプロフェッショナルとして必要です。

ココが  
ポイント  
1

小さいブレード。

歯面・歯周組織へのダメージをより少なくでき、失活歯根面や過去にSRPが行われている歯根面などデリケートな部位にも適応します。

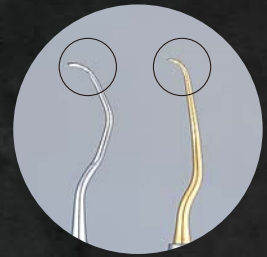

ココが  
ポイント  
2

長めのシャンク  
ポケット底、深くまで到達。

第1シャンクは通常スケーラーよりも2mm長いため、約6mmの歯周ポケットにもアクセスできます。部位特異的な深い歯周ポケットにも対応します。



ココが  
ポイント  
3

滑りにくいスリット形状。

コントロールリングハンドル(CRH)採用。指先で触知しながらテブライドメントを目標したスケーリングが行えます。

ココが  
ポイント  
4


程良い太さのグリップ。

軽量(約12.4g)、太め(φ9.5mm)の握りやすいグリップで手指の疲労を軽減します。

ココが  
ポイント  
5

窒化チタンコーティング。

ゴールド色のため、第1シャンクの角度や挿入状況が判断しやすく、キュレットコントロールがしやすくなっています。また窒化チタンコーティングは歯周組織にも優しい加工です。

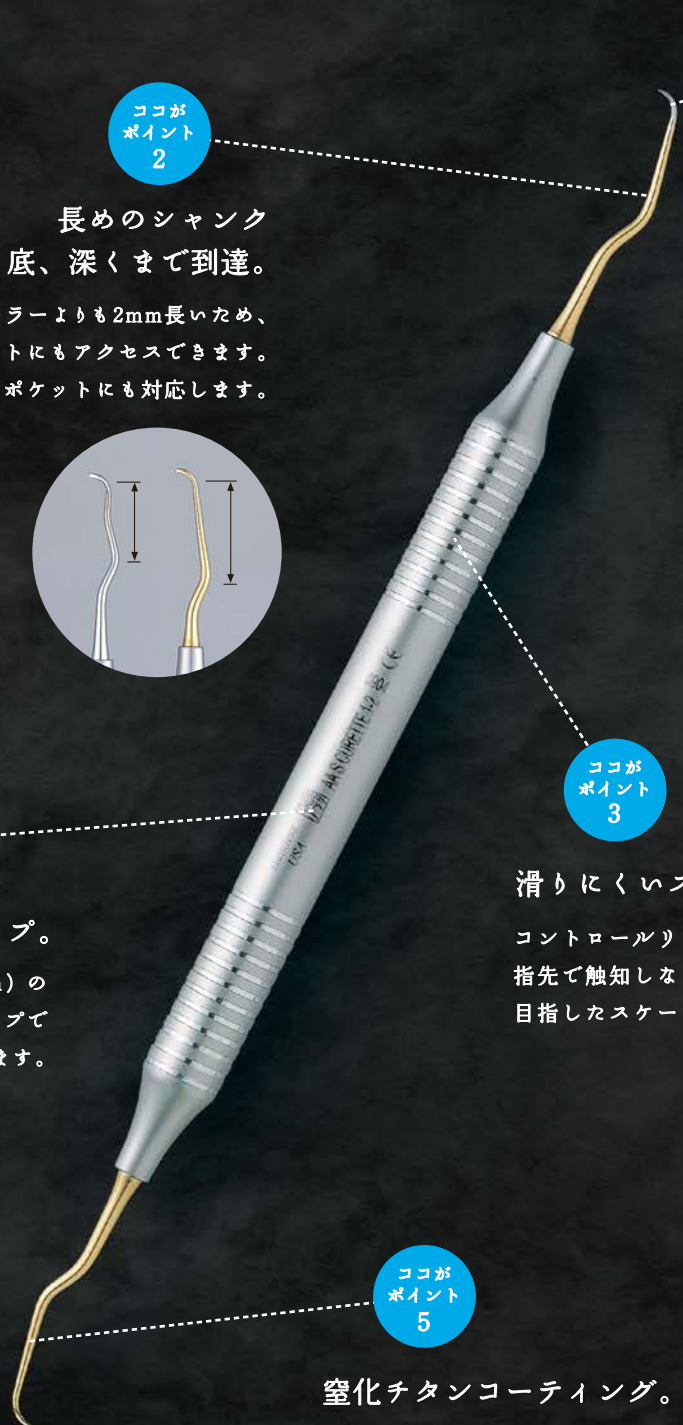


# ノーデント・デュラライト AAキュレット イニシャルセット

Nordent  
MANUFACTURING INC.



「AAキュレット イニシャルセット」は  
少ない本数で、オールマイティーに使えるから  
管理も滅菌も簡単です。

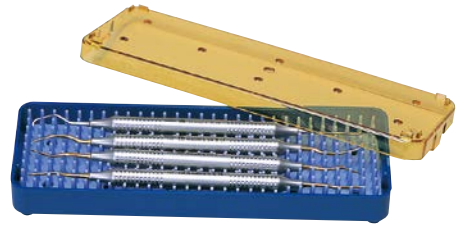

滅菌対応ケース

部位特異的な深いポケット・失活歯根面・過去にSRPを行われている根面など  
よりデリケートさが求められる歯根面に有効です。

## AAS1-2

●前歯の歯肉縁下用 深いポケットや複雑な部位に適応します。



## AAS11-12

●小臼歯・大臼歯近心用



## AAS13-14

●小臼歯・大臼歯遠心用



## AAシッケル

●下顎前歯根近接部・歯列叢生部の縁上用 縁上の歯石および着色の除去に効率的です。



## OPTION

### AAエクスプロ

エクスプローラーとプローブが1本のインスツルメントに。



●プローブ:3-3-3-3mm目盛

●エクスプローラー:  
根面の様子がより触知しやすいハンドル形状

※すべて原寸大です。

●価格は2015年1月現在。消費税は含まれておりません。  
<http://www.yoshida-dental.co.jp>

- AAキュレット・イニシャルセット/標準価格:33,000円(AAS1-2、AAS11-12、AAS13-14、AAシッケル各1本、滅菌対応ケース)
- 単品/AAエクスプロ・標準価格:6,100円 AAシッケル・標準価格:5,600円 AAS1-2、AAS3-4、AAS5-6、AAS7-8、AAS9-10、AAS11-12、AAS13-14・標準価格:各7,000円 滅菌対応ケース・標準価格:9,000円
- 届出番号:[AAキュレット]一般の名称:歯周用キュレット 13B1X00005000083(一般)[AAシッケル]一般の名称:歯科用スクレーパー 13B1X00005000087(一般)  
[AAエクスプロ]一般の名称:歯科用探針 13B1X00005000089(一般)

●製造販売元: 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931 (器材部)  
●製造業者: ノーデント (NORDENT MANUFACTURING INC)



2015年1月/KIN/20/@20/改 (01)02747937012130