

コンパクトサイズ、省スペースの ハイパワーファーネス



ヨシダ歯科技工用リングファーネス


ラボマックス



ラボマックス500

フルオートタイプ・リングファーネス 9種類のプログラムが設定可能

5ステージの焼成プログラムが設定可能です。昇温速度、係留温度、係留時間の3項目で設定。単一焼成だけでなく二段階焼成、係留したい温度が3ステージ以上でも5ステージまでの設定ができます。

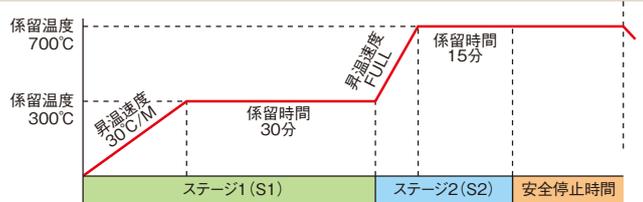

充実した各種機能

予め設定した終了希望時簡に焼却が終了する「終了予約タイマー機能」。焼却終了後、一定時間を経てからヒーターとアフターバーナーへの通電を自動的に切る「安全停止タイマー機能」。温度計の炉内温度表示と実際の炉内温度に違いがある場合に、炉内温度を補正できる「炉内温度の補正機能」など、便利な機能が満載です。



- 仕様 ●ラボマックス500 ●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:1.2kVA ●最高使用温度:1,000°C ●安全設置空間:左右前後50cm以上、上部150cm以上 ●本体寸法:W260×D325(360含取手)×H360mm ●炉内寸法:W115×D180×H90mm ●本体重量:約13kg ●プログラム数:9 ●ステージ数:5 ●一般名称:歯科技工用リング焼却炉 ●販売名:ラボマックス500 ●届出番号:13B2X00051000019(一般) ●標準価格:245,000円

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●お問い合わせは下記まで



ラボマックス300

セミオートタイプ・リングファーネス コンパクトサイズで低価格

本体がコンパクトサイズなので、設置する場所を選ばない省スペース設計です。低価格なので、お求めやすいリングファーネスです。(炉内寸法はW115×D180×H90(mm))

シンプルな使い易さ

昇温速度と係留時間が設定可能。スタートキーと係留タイマーで操作が可能です。高出力ヒーターで、設定温度まで確実に昇温し、焼却できます。



- 仕様 ●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:1.2kVA ●最高使用温度:1,000°C ●安全設置空間:左右前後50cm以上、上部150cm以上 ●本体寸法:W260×D325(360含取手)×H360mm ●炉内寸法:W115×D180×H90mm ●本体重量:約13kg ●一般名称:歯科技工用リング焼却炉 ●販売名:ラボマックス300 ●届出番号:13B2X00051000018(一般) ●標準価格:200,700円

リングファーネス用アフターバーナー

ラボマックス HC101S

- 仕様 ●本体寸法:W130×D160×H170mm ●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:2000W ●標準価格:96,400円

※白金触媒方式



禁無断転載

◎発売元: 株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp/>
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931 (器材営業本部)

◎製造販売元:城田電気炉材(株) 東京都中野区若宮2-55-3



2016年5月/ON/@20/改 (01)02747937011706