

YOSHIDA

根管拡大・洗浄装置

Sonic Endo Air drive

ソニックエンド エアドライブ



サブソニック振動による
強力な洗浄効果

2,000~3,000Hzの振動と 最大1ミリの振幅で効率よく 根管の拡大と洗浄ができます。

ワンタッチ
プッシュボタン*

*インストルメントの交換が、
簡単にできます。

ストッパー


注水パイプ

ネック

先端の振れ幅
1mm以下


●ソニックエンド用ホルダーK01

- 1 各社のジョイントが揃っていますので、アダプターを使用せずに直接、各社ホースに接続することができます。
- 2 ヘッド部が小さく、視界を妨げないため、繊細な治療が可能です。

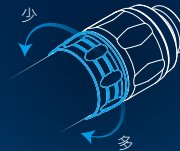

水量調節リング

水量を確認しながら水量調整リングを回し、水がホルダー用インストルメントに沿って流れるように調整します。

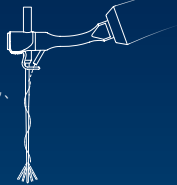

パワー強方向



パワー弱方向

パワーコントロール

パワーコントロールリングを回してインストルメントの先端部が1mm以下になるように調整します。

●推奨インストルメント



Rispisonic®
リスピソニック



Shaper®
シェーパーソニック

●セット内容



本体




ソニックエンド用
ホルダーK01



専用レンチ

●ダイレクトカップリングタイプ 各社のタービンホースに直接接続可能なダイレクトカップリングタイプもラインナップ

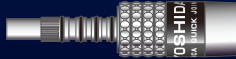

ソニックエンドY ヨシダ オブチカジョイント



ソニックエンドYST ヨシダ STジョイント



ソニックエンドK KaVo® MULTIflex LUX®



ソニックエンドM MORITA® モリタαメインチューブ



ソニックエンドN NSK® Mach/Phatelus coupling



ソニックエンドOS オサダファインジョイント

◎KaVo®及びMULTIflex LUX®は、Kaltenbach & Voigt GMBH&CO.KGの登録商標です。◎MORITA®は、株式会社モリタ製作所の登録商標です。
◎NSK®及びMach/Phatelus®は株式会社ナカニシの登録商標です。◎オサダファインジョイントは、長田電機工業株式会社の商標又は登録商標です。

◎販売名:ソニックエンド ◎一般的名称:歯科用根管拡大装置 ◎認証番号:229AKBZX00004000 (管理 特管) ◎製造販売元:(株)ミクロン 東京都大田区池上2-17-7 ◎標準価格:198,000円
◎販売名:シェーパーソニック ◎一般的名称:電動式歯科用ファイル ◎承認番号:21900BZX01154000 (管理) ◎製造販売元:(株)ヨシダ ◎標準価格:4,600円
◎販売名:リスピソニック ◎一般的名称:電動式歯科用ファイル ◎承認番号:21900BZX01151000 (管理) ◎製造販売元:(株)ヨシダ ◎標準価格:3,350円

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2018年11月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●取扱店

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター
0120-178-148

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 ± 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937016213

●発売元: 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

C02053/2018年11月/SO/@20/30/再