



Keep it Simple

# 求めていたカタチが、ここに。 エクシード Cs。 シェーズ

それは、空間をデザインするユニット。

いかに自分の目指す診療を実現し、患者さんに伝えていくか。

それには、ドクターの姿勢やスタイルを

体現した空間づくりが欠かせません。

中でも鍵となるのは、診療室の主役であり、

患者さんと直に接する場所であるユニットです。

エクシードCsは、無駄を削ぎ落としたシンプルなデザイン。

いろいろなインテリアに馴染み、使い勝手にも優れています。

自分らしさを表現し、発信する空間を完成させる

重要なピース、それがエクシードCsです。

# 進化する エクシード Cs。 シェーズ

## 診療空間をプレミアムに。

シンプルなデザインを継承したエクシード Cs が  
より快適に進化しました。

新しく生まれ変わった明るい LED オペレーティングライト、  
マイクロモーターやユニットの調整をタッチパネル操作で  
より直感的でスマートに導き、  
ディテールを凝らしたツートーンステッチのチェアシートや  
メガネやスマートフォンが置けるアメニティトレイを  
新たにしつらえました。

患者さんへのホスピタリティを感じいただける  
エクシード Cs、プレミアムバージョンの登場です。

**EXCEED Cs**  
PREMIUM







# おもてなしの質を高める。

エクシードCsのプレミアムバージョンは、患者さんにより快適に診療にのぞんでいただき、ドクターやスタッフの心遣いを感じられるように、装いを新たにしました。

## ずっとフィットプライムシート ツートーンステッチ



2色のレザーシートを組み合わせたプレミアムなツートーンカラーの特注色をオプションでご用意。ステッチも糸を変えてアクセントに。一つひとつ職人が丁寧に仕上げます。チェアカラーに合わせて新たに3種類のパネルカラーが選べるようになりました。



チェアカラー	スイートモカ	スモーキーグリーン	エクストリームレッド
	✕	✕	✕
パネルカラー	ビターゴールド	ストライプホワイト	カーボンブラック

## LED オペレーティングライト L4ライト




4灯LEDで4,500K、30,000lxの照度を実現。圧迫感を極力減らすためにリング形状のライトをデザインしました。中央の空間部分には、診療レコーダーや教育目的として記録するための市販のハンディカメラを取り付けることができます。タッチレスセンサーの位置を見直すことで、術者の頭部で反応してしまう誤動作を防ぎます。

## アメニティトレイ



エクシードCsのデザインに合わせたスタイリッシュなアメニティトレイを装備。診療中の患者さんのメガネやスマートフォンを一時置きできる、患者さんへの心配りに配慮した便利なトレイです。

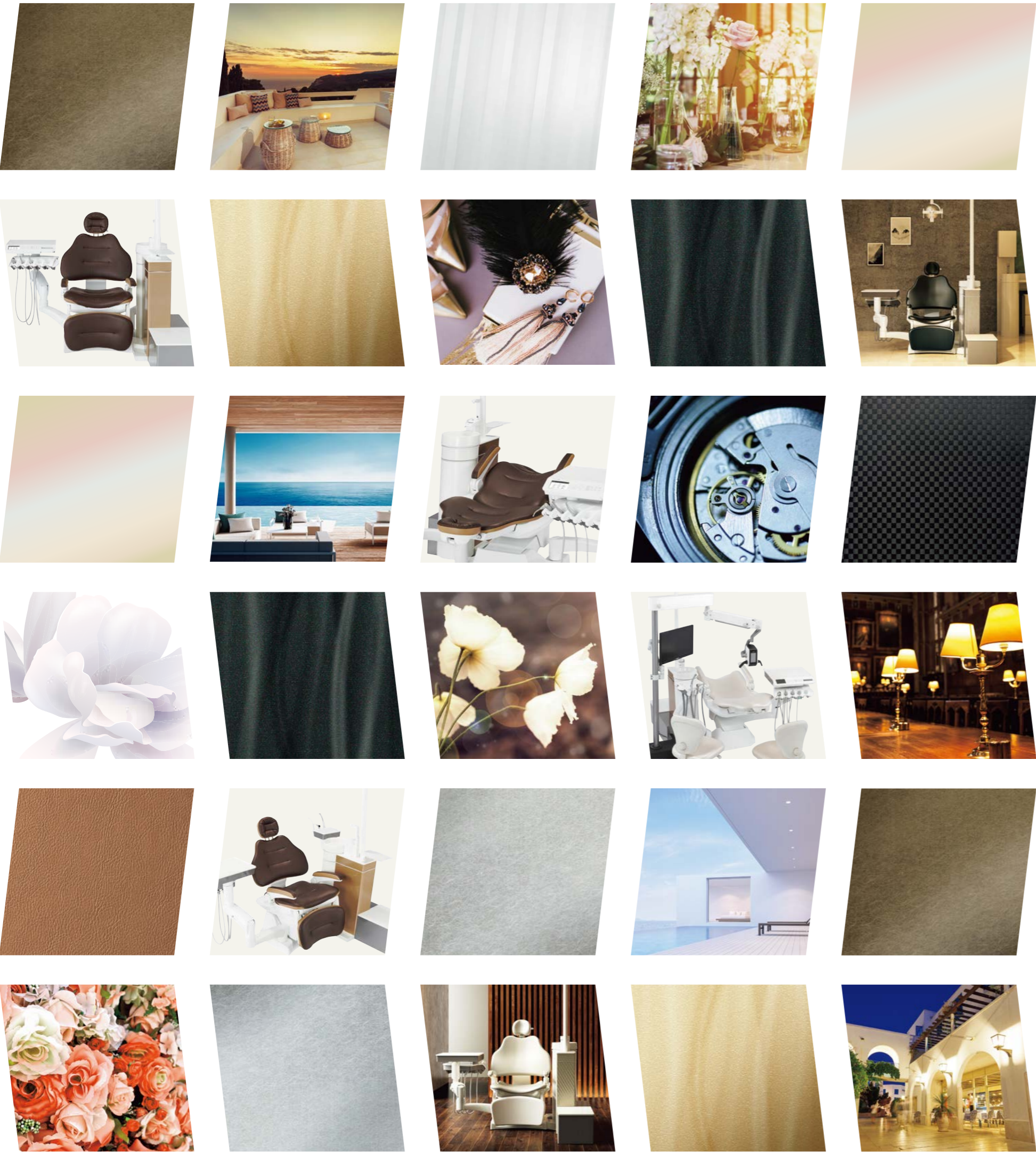

さあ、思い描いていた空間へ。

四辺形と円を基本にした極限までシンプルなデザインにより、  
素材やカラーがひととき映えるエクシード Cs。  
バリエーション豊富なパネルカラーや、  
チェアカラーを自由に選んで組み合わせ、  
イメージ通りの診療空間をつくり上げることができます。  
そのこだわりは、ドクターの診療へかける思いとして  
患者さんに伝わります。  
思い描いていた空間で、患者さん一人ひとりと心が通じ合うケアを。

EXCEED **Cs**  
PREMIUM



身体にフィットするR形状で包み込まれる座り心地。



フラットな設計により、デザイン性とお手入れのしやすさを両立。

## 洗練されたフォルムの中に、機能がある。



患者さんがうがいのしやすい位置に移動できる、ウェルカムスピットン。



ツートーンステッチの贅沢なチェアでありながら、薄いバックレストで、より患者さんに近い診療ポジションを実現。

一人ひとりに、しっかり寄り添う。

人が合わせるのではなく、人に合わせるチェアを。  
エクシードCsの「ずっとフィット」は、  
快適性と機能性を追求し、人間工学に基づいて  
バックレストや座面、レッグレストなどを設計。  
身体の大きい人にも小さい人にもこれまでより  
ずっと適応し、ずっと寝ていたくなるような  
心地よさを実現しました。  
また、バックレストのショルダー部を  
切り欠き形状にすることで、より患者さんに近い  
診療ポジションを取りやすくしています。  
患者さんに、ドクターに、しっかり寄り添うチェアです。


大きい人にも小さい人にも、「ずっとフィット」。

## Ⅰ寝心地

素材の弾性を生かした、多様な体型をカバーする「ずっとフィット」バックレスト



チェアの初動と停止時の振動を低減

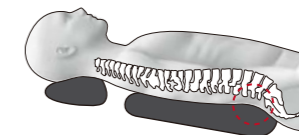


長時間、同じ体勢でも疲れにくいランバーサポート

肘ものせられるゆったり広いバックレスト

座面とレッグレストは、脚閉じカーブで自然に閉脚

## Ⅱ診療のしやすさ

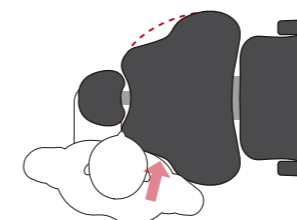

薄いバックレスト、切り欠き形状で  
患者さんに近づける診療ポジション




ワンタッチで上下する、バックレストと  
ヘッドレスト

## Ⅲ乗り降りのしやすさ

ロングアームレスト

最低位380mm

-5° レッグレスト

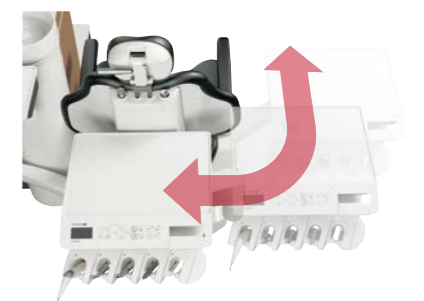

ドクターハンガーがチェアの背面まで  
移動できるので、スムーズな患者さん導入と  
多様な診療ポジションが可能

まるごと洗う、という発想。



毎日清掃していても落としきれない細部の汚れを減らすために、さまざまなアイデアを盛り込みました。たとえば、「テーブルをまるごと洗えたらいいのに」という思いをかなえたのが、簡単に外せるテーブルトップとスイッチパネルが一体化したシリコンカバーです。本体機器に汚れがつかず、いつでも新品のカバーと交換できます。また、スピットンやユニット部は凹凸の少ないフラットな設計で拭きやすくなっています。エクシード Cs は清掃にかかる時間を短縮し、清潔さをキープして、患者さんに安心をお届けします。



はずして洗える。細部まで拭ける。



取り外し洗浄可能な各パーツ

## Ⅰ お手入れ



手が触れる部分はシリコンカバーで覆い、取り外しが簡単



お手入れのしやすいフラットデザイン



人工大理石のユニット天板  
ユニット天板は、お手入れしやすい石目のテクスチャが上質な人工大理石製が標準装備。



清掃性のよい无影灯  
前面カバーを外して清掃することができます。



フラッシング機能搭載  
インストゥルメント類とコップ給水の滞留水をオートサイクルで排出し、水回路をクリーンに保ちます。



フラッシングの手順が液晶モニターで確認できます。



操作スイッチを一箇所へ集約  
一日の始まりと終わりの操作を一箇所で行えるよう、電源スイッチや水・エアークック、ユニボアを配置しました。



テーブル部は、シリコンカバーを取り外すとフラットなステンレストップ

充実の診療アイテム

マイクロモーター / マイクロモーターハンドピース

いずれもマイクロモータ BL と接続できます。

マイクロモータ BL



100 回転から 4 万回転のワイドレンジ小型軽量マイクロモーター。当社従来品マイクロモーターの質量が 80g から 100g のところ、57g と大幅な軽量化を実現しました。P4 参照。

E20M (減速)



臼歯部へも楽にアクセスできる、コンパクトヘッドのエンド治療用ハンピース。マイクロモータ BL と使用することで、より精度の高いトルクコントロールができます。

エアタービン

Windroad H1 (ウィンドロード)



清掃性アップ、キズ防止コーティング採用。メンテナンス重視モデル。カートリッジが即日現地交換可能で修理でお待たせしません。(有資格者による交換が必要です。)

エアスケーラー

ルーティー560-YL-Neo



チップを交換するだけでスケーリング、根管拡大、根管洗浄、歯周ポケット洗浄や歯面清掃まで、様々な用途に活用できます。

ユリー



ブラシ専用のエアスケーラー。サブソニック振動による洗浄効果で、プラーク除去、無水下でポリッシングペーストを使用した細部のステイン除去等、幅広い診療に使用できます。

ドクターハンガー



ドクターテーブルから独立し向きが変えられるインストルメントハンガー。角度をつけたホルダー部は、手当たりを防止し、治療の流れを妨げない設計です。

SV40MLXS (等速)



SV 40SI (等速)



SV 40MLX (等速)



Skyroad SDC1 (スカイロード)



パワフルな高切削効率モデル。切削力を持続させるために、バーへ満遍なく注水するマルチジェットスプレーを採用しています。

ユニット搭載超音波スケーラー

ピエゾ S II



強化アルミボディ採用で汚れが落ちやすく、耐久性能が高いモデル。チップ接続部だけの部品交換修理ができます。

ブチピエゾ LED



ブチピエゾ II



アシスタントハンガー



アシスタントハンガーにもシリコンカバーを装備。アシスタント作業に必要な材料などを置くスペースを設けました。

SV200MLXS (5 倍速)



サイズ・質量とも約 10% コンパクトに。※操作性に優れ、手指への負担が少ない、ショートタイプのハンドピースです。※当社従来品との比較

SV200MLX (5 倍速)



EXタービン



軽量で操作性がよいモデル。シリコングリップは全 5 色用意しています。(専用ホースが必要です。)

シリンジ

905シリンジY



ボディが、最大径 24mm のスリム形状。アルミ硬質アルマイトで、高温滅菌にも対応しています。

マルチウエイシリンジ5-LUX



光付き、ヒーター付き、質量 98g の軽量タイプです。

USBポート



アシスタントハンガーの底面に便利な USB ポートを設けました。

ハイブリッドインストルメント

keiair (ケイエア)



マイクロモーター×エアタービン2つを掛け合わせ生まれた、インストルメント。ヘッド部に搭載したセンサー制御により、従来タービンでは不可能だった一定速度の維持が実現。エアタービンの軽さや繊細さはそのままに、高いトルクと安定したスピード感で、効率的で思い通りの操作が可能に。(専用ホースが必要です。) P5 参照。

**Powerモード**  
「Power」モードは、負荷がかかるとフィードバックのエアを増量し、トルクを自動でアシスト。一定速度の維持が実現します。

**6万から32万回転の任意調節**  
クラウンやブリッジの除去、支台歯形成、フィニッシングなどにおいても、5 倍速ハンドピースに近いスピード感でお使いいただけます。

**38g の軽量コンパクト**  
38g と非常に軽量なので、手指への負担を軽減。コンパクトな形状で女性ドクターにもおすすめです。



マイクロスコープ仕様



ユニットにマイクロスコープを搭載できます。

ネクストビジョン



最高倍率 80 倍、臨床の幅が広がる 4K 高画質。体格差にとられない広いワーキングディスタンス。深い被写界深度と、オートフォーカス、自在な 3 軸アームで直感的なユーザビリティを実現します。レンズを覗かないスタイルだからこそできる新しいマイクロスコープです。※モニター、モニターアーム、フットコントローラーはオプションもしくは別売です。

フットコントローラー

横スライド式フットコントローラー





踏み込み式フットコントローラー



有線と無線タイプから選べます。

keiairは、5 倍速ハンドピースとエアタービン両方の使用域を含めた回転速度で、使用することができます。

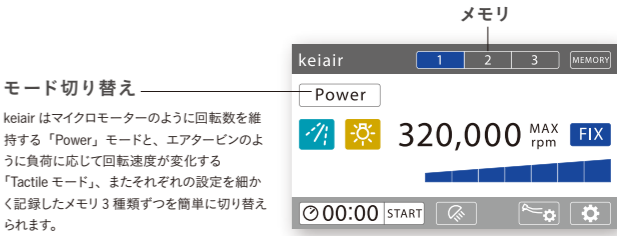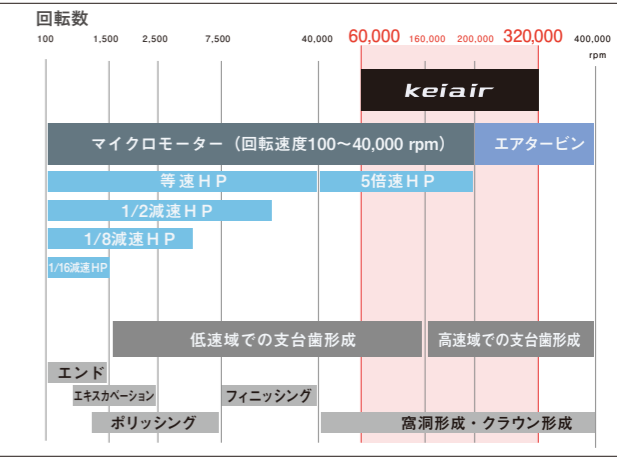

# 自分のスタイルを叶えるカラーバリエーション

パネルカラーをお選びください。


チェアカラーをお選びください。



ビターゴールド  
Bitter Gold

シルバー  
Silver

塗装仕様のパネルカラーです。  
織細で奥行きのあるメタリックの色合いは  
エクシードCsの魅力をより引き立たせます。

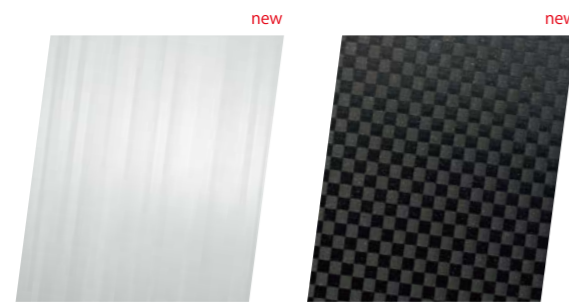

ストライプホワイト  
Stripe White

カーボンブラック  
Carbon Black

テクスチャ仕様のパネルカラーです。  
表情豊かな質感が上質なインテリアを演出します。



ウェーブゴールド  
Wave Gold

ウェーブブラック  
Wave Black

ブレイブシルバー  
Brave Silver

ブレイブブラウン  
Brave Brown



new  
ずっとフィットプライムシート〈ツートーンステッチ〉 **OPTION**



スイートモカ

スモーキーグリーン

エクストリームレッド

ずっとフィットプライムシート〈縫製タイプ〉

職人がひとつずつ縫い上げた人工レザーのチェアシート。アメリカンカー（仔牛）をモチーフにした  
テクスチャと、豊富で落ち着いたカラーが、高級感のあるインテリアを演出します。




ずっとフィットシート〈ノーマルシート〉

縫い目がなく清掃性に優れたチェアシート。イタリア製の人工レザーを使用し  
目にも鮮やかなカラーが明るいインテリアのアクセントになります。



アームレストをお選びください。

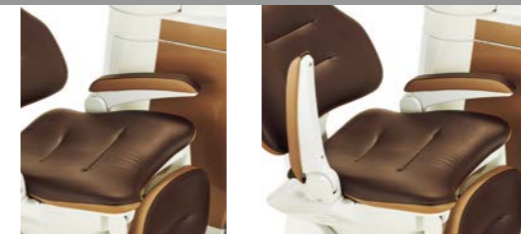

アームレスト（左）  
標準仕様のアームレストは左手のみ  
で、固定式です。

アームレスト（右）  
右手のアームレストは跳ね上げ式で  
座る際に横からもアプローチできます。

診療アイテムをお選びください。




診療アイテムの詳細はP16、17参照。



選択例  
パネルカラー：ビターゴールド  
チェアタイプ：前折れ  
テーブルタイプ：I型ベースマウント  
チェアカラー：ずっとフィットプライムシート〈ツートーンステッチ〉  
スイートモカ **OPTION**  
アームレスト：アームレスト（右） **OPTION**  
診療アイテム：keiair **OPTION**  
ビエゾS II **OPTION**

使いやすいチェアタイプ・テーブルタイプをお選びください。

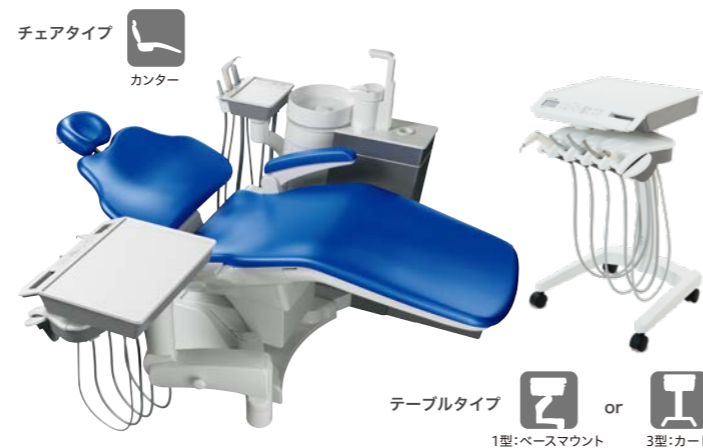

I仕様

装備		エクシードCs プレミアム	エクシードCs
チェアタイプ	前折れ	○	
	カンター	△	
チェア	2軸タイプ枕	○	
	アームレスト（左）	○	
	アームレスト（右）	△	
	ずっとフィットシート	○	
	ずっとフィットプライムシート（1色縫製タイプ）	○	△
	ずっとフィットプライムシート（ツートーンステッチ）	△	
	モーター駆動（スロースタート・ストップ機構付）	○	
	スピード調整	○	
	バックレスト上下スライド機構（手動）	○	
	レッグレストマイナス角度（マイナス5度）	○	
	メモリ数（S1、S2、子供大人モード）	12	4
テーブルアーム	1型（ベースマウント）	○	
	3型（カート）	△	
テーブル部	テーブルトレー	○（シリコン）	
	オートガスバーナー	△	
	表示器	液晶タッチパネル	VFD
ハンガー機能	テーブル分離型ハンガー	○	
	デンタル	×	
フィルムビューア	パノラマ	△	
	ディスプレイアーム（ライトポール部）	△	
液晶ディスプレイアーム	ディスプレイ取付スタンド（テーブル部）	△	
	スピットン	○	
ユニット部	陶器	○	
	回転機構（手動）	○	
	重量検知式オートカラン（オートカランPC）	○	
	バキューム停止遅延機能	○	
	オートフラッシング（フラッシング受け内蔵）	○	
	水フィルタ（ユニポア）	○	
	エアフィルタ	○	
	水ワンタッチ	○AEH	
	エアワンタッチ	△AEH	
	アメニティトレー	○	×
	ユニットサプライ天板（人工大理石）	○	△
排水システム	ユニットサプライ天板（樹脂）	-	○
	セパレータ	△	
無影灯	L4ライト	○	△
	LライトY	△	○
	ルキオン(12灯)	△	
	ルミレッド	△	
	マイクロスコープ搭載	△	×
AEH機能	滅菌対応手元コック付バキュームグリップ	○	
	滅菌対応手元コック付排唾グリップ	○	
	AETトレー	○（シリコン）	
	取っ手カバー	○（シリコン）	
	AEHホルダー着脱式（配置替え可能）	○	
フットコントローラ	有線（横スライド式）	○	
	有線（踏み込み式）	△	
	無線（踏み込み式）	△	

◎販売名:エクシード Cs ◎医療機器認証番号:228AKBZX00083000 ◎一般的名称:歯科用ユニット(管理医療機器 特管 設置)  
◎電源:AC100V 50/60Hz 900VA ◎使用空気圧:0.56~0.60MPa ◎使用水圧:0.2~0.5MPa  
◎電撃に対する保護の形式:クラスⅠ機器 ◎電撃に対する保護の程度:B形装着部 ◎質量:200kg~215kg

※本カタログに掲載の商品写真はオプション装備仕様です。 ※モニター画面は、はめ込み合成です。  
※本カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。また色調は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

●発売元: 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0120-178-148(コンタクトセンター)  
●製造販売元:株式会社吉田製作所 〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 <http://www.yoshida-dental.co.jp>

○標準装備 △:オプション ×:選択不可  
※1ケイエアのみでの2タービン仕様は不可  
※2エンドモード対応可


装備		エクシードCs プレミアム	エクシードCs
エアハンドピース	ウインドロード	○	
	スカイロードSDC1	△	
	ケイエア	△	
	EXタービン	△	
マイクロモーター	2タービン仕様	△※1	
	マイクロモーター40HD-LUX	×	
	マイクロモーター3L（ブラシレス）	△	○
	マイクロモーターBL（ブラシレス）	○※2	△
マイクロモータ ハンドピース	2モーター仕様	△	
	YWハンドピースSV40MI	△	
	YWハンドピースSV40SI	○	△
	YWハンドピースSV40MLX	○	△
	YWハンドピースSV200MLX	△	
	CUREALLハンドピース40S	△	○
	CUREALLハンドピース40L	△	○
シリンジ	YWハンドピースSV40MLXS	△	
	YWハンドピースSV200MLXS	△	
	YWハンドピースE20M	△	
	905シリンジY（テーブル側）	○	△
	マルチウェイシリンジ3-ST（テーブル側）	△	○
	マルチウェイシリンジ3-LUX（テーブル側）	△	
	マルチウェイシリンジ5-LUX（テーブル側）	△	
超音波スケーラー	V型シリンジ（テーブル側）	△	
	905シリンジY（AEH側）	○	△
	マルチウェイシリンジ3-ST（AEH側）	△	○
	マルチウェイシリンジ3-LUX（AEH側）	△	
	マルチウェイシリンジ5-LUX（AEH側）	△	
	V型シリンジ（AEH側）	△	
	ブチビエLED	△	
エアスケーラー	ブチビエⅡ	△	
	ビエソⅡ	△	
	ルーティ-560	△	
	ユリー	△	

●製造販売元 吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔660  
◎販売名:ルキオン ◎届出番号:08BZX00001000006（管理 特管）




●製造販売元 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6  
◎販売名:L4ライト ◎届出番号:13B1X00133000078（管理 特管）  
◎販売名:ルミレッド ◎届出番号:13B1X00133000035（管理 特管）  
◎販売名:スカイロード ◎認証番号:218AKBZX00116000（管理 特管）  
◎販売名:ケイエア ◎認証番号:227AABZX00043000（管理 特管）  
◎販売名:ウインドロード ◎認証番号:224ACBZX00073000（管理 特管）  
◎販売名:EXタービン ◎認証番号:228AKBZX00060000（管理 特管）  
◎販売名:マイクロモータ40H ◎認証番号:21700BZX00045000（管理 特管）  
◎販売名:マイクロモータ3L ◎認証番号:224AKBZX00055000（管理 特管）  
◎販売名:マイクロモータBL ◎認証番号:227AABZX00046000（管理 特管）  
◎販売名:YWハンドピース ◎認証番号:219AKBZX00160000（管理 特管）  
◎販売名:CUREALLハンドピース ◎認証番号:219ACBZX00011000（管理 特管）  
◎販売名:マルチウェイシリンジ ◎届出番号:13B1X00133Z00024（管理 特管）  
◎販売名:905シリンジY ◎届出番号:13B1X00133000066（管理 特管）  
◎販売名:ブチビエ ◎認証番号:220ACBZX00050000（管理 特管）  
◎販売名:ビエソⅡ ◎認証番号:227AKBZX00076000（管理 特管）  
◎販売名:ネクストビジョン ◎届出番号:13B1X00133000079（一般 特管）

●製造販売元 株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7  
◎販売名:V型シリンジ ◎承認番号:20200BZX00446000（管理 特管）  
◎販売名:ルーティ-560 ◎認証番号:20700BZX00045000（管理 特管）  
◎販売名:ユリー ◎認証番号:226AKBZX00111000（管理 特管）

前折れ・1型

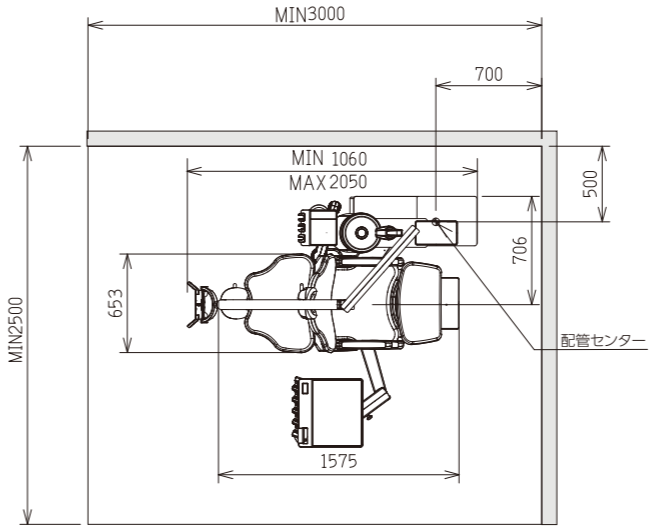

カンター・3型

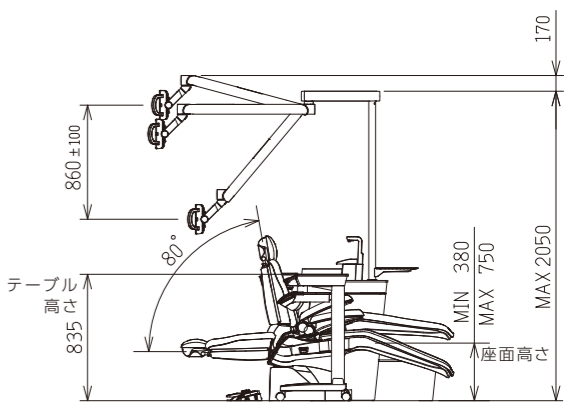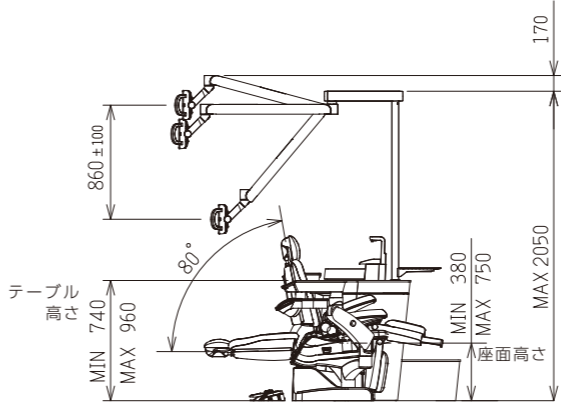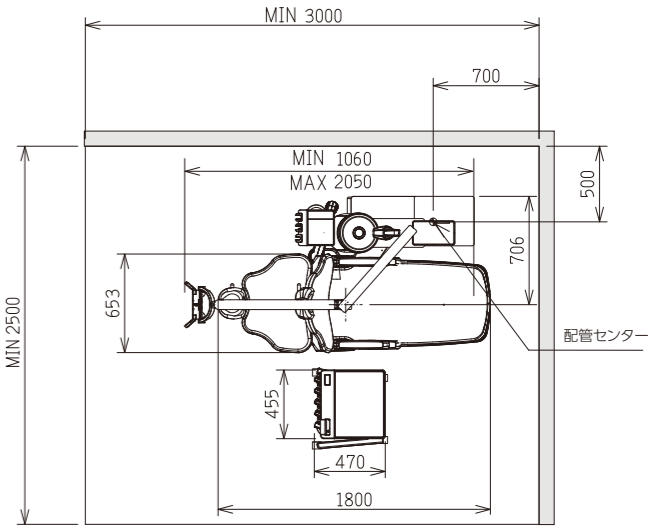

[S=1:50]  
[単位:mm]



エクシードCsがJIDAデザインミュージアム  
セレクションvol.19に選定されました。

JIDAデザインミュージアムセレクションとは、公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会（JIDA）が、デザイン性、機能性の高い製品を将来に向けて保存・記録するために、その時代を語るメッセージを秘めた製品を選定するものです。



エクシードシェーズの特設サイトから、カラーシミュレーションや、いろいろなスタイル別のカラーイメージをご確認いただけます。  
色見本帳も貸し出しておりますので、お近くのヨシダショールームまたは営業所までお問

エクシード Cs



