

PMH (医療費助成) 操作マニュアル



こちらの機能はオプションです。別途ご契約が必要となります。

<ご案内>

本書は「PMH（医療費助成）」についての操作手順を説明しています。本書をよくお読みになり十分に活用してください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

はじめに

本書は、「PMH(医療費助成)」についての操作手順を説明しています。本書をよくお読みになり十分に活用してください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

※本書中に使用している画面は参考画面です。お客様のお使いの機種により多少異なりますのでご了承ください。

Contents

PMH (医療費助成) について	1
画面説明	2
操作・運用方法	5

PMH (医療費助成) について

◆PMH (医療費助成) とは？

PMHとは、Public Medical Hubの略称で、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係る情報を、自治体や医療機関などつなぐシステムのことです。
今までは「紙の受給者証」が必要でしたが、PMH(医療費助成)を導入するとマイナンバーカードだけで受給者証の情報が取得可能になります。

◆運用時の注意

- 有効期限内の医療費助成情報のみ取得できます。
- 顔認証付きカードリーダーで医療費助成情報の提供に患者様が同意した場合のみ、取得可能となります。
- 自治体がPMHに登録を行っていない公費・福祉医療費助成制度の場合、参照および患者情報画面への反映はできません。
- 医療費助成情報を取得しても、メンテナンス画面に福祉マスタの登録がない場合は、患者情報画面に反映できません。福祉マスタメンテナンス画面にて登録してから再度操作を行ってください。(紙の受給者証運用時と同じ)
- 歯科では使用不可の医療費助成情報も取得されます。
受給者証券面情報を確認頂くなどでお客様で使用可能かどうかをご判断頂く必要があります。
(使用可能か不明な場合は必要に応じて自治体へご確認ください。)
- 医療扶助(生活保護)の情報は取得できません。取得したい場合は別途お申込みが必要です。

運用の流れ 患者様がマイナンバーカードを持参した場合

・患者様が行う作業：



・医院様が行う作業：



顔認証付きカードリーダーにて認証(医療費助成情報の提供に同意)

【マイナンバー】ボタン押す

公費・福祉医療費助成制度の資格情報を確認する

【PMH(本日取込あり)】または【PMH】で資格情報を患者情報入力画面に反映

画面説明

PMH(医療費助成)を導入すると、以下の画面が変更・追加となります。

<マイナンバー取得患者一覧画面>

要求時刻	患者番号	氏名	生年月日	保険者番号	保険者名	記号・番号・枝番	PMH
10:01:00		資格 一郎	S35. 6. 2	138016 千代田区		恵う10・99180000	●
15:31:50		資格 二夫	S25. 1. 2	01130012 全国健康保険協会東京支部		10・002-00	-
15:51:50		資格 花子	H11. 1. 1	138099 品川区		101・1619930207x	失

<資格情報比較画面>

患者情報	資格情報	取込
1:カナ氏名	シク イチロウ	✓
2:氏名	資格 一郎	✓
3:生年月日	昭和35年 6月 2日	✓
4:性別	男	✓
5:本人家族区分	本人	✓
6:負担率	3割	✓
7:郵便番号	100-0014	✓
8:住所	東京都千代田区永田町1-99-99	✓
9:保険者番号	138980	✓
10:記号・番号・枝番	恵う10・1649950100x001-01	✓
11:有効期限		✓
12:資格取得日	平成24年 4月 1日	✓
13:被保険者氏名		✓
14:所得区分	2.適用区分:ア	✓
15:発行日	令和 3年 8月 1日	✓
16:有効期限		✓

1 「PMH」

医療費助成制度の情報がある場合、以下が表示されます。

- : 医療費助成情報があり、取得に成功した場合
- 失: 医療費助成情報はあが、取得に失敗した場合
- : 医療費助成制度情報なし

※資格情報比較画面のPMH欄の場合、現在、患者情報画面に登録されている公費/福祉欄の情報(負担者番号、受給者番号、期限)と差異があると、背景色がピンク色になります。

2 【保険情報】タブ/【PMH】タブ

・【保険情報】タブ

患者情報および資格情報を表示します。

・【PMH】タブ

PMH(医療費助成)情報がある場合、【PMH】タブが表示されます。クリックすると以下の画面が表示されます。

※画面説明は次ページ参照

PMH	取込
●	✓

<資格情報比較画面:【PMH】タブ>

患者番号 000000001

PMH 薬剤情報 特定健診 診療情報 手術情報 処方箋 電子

表示記号 ○:同意あり ×:同意なし -:情報なし ●:情報あり 失:取得失敗

現在の公費・福祉(患者情報画面での設定内容)

公費・福祉	負担者番号	公費・福祉名	受給者番号	期限
第1公費	80000003	福島子ども80	1234566	R07.08.09
第2公費	12000006	生活保護法	1234558	R07.09.10
福祉				

※PMHで取得した公費・福祉と、負担者番号、受給者番号、期限が異なる箇所の背景色が変わります(医療扶助は比較対象外です)

PMHで取得した公費・福祉

No	負担者番号	公費・福祉名	受給者番号	期限	対象
1	24918001	●自立支援医療費受給者証(育成医療)	1092004	R07.07.31	<input checked="" type="checkbox"/>
2	24918002	●自立支援医療費受給者証(育成医療)2	1092002	R07.07.30	<input checked="" type="checkbox"/>

※医療扶助の情報は、PMHでは取得できません。
※自治体がPMHに登録を行っていない公費・福祉は、PMHでは取得できません。

受給者証表示

取得した資格情報と差異があります。上書き、または保険追加してください。
※取消した場合は同意情報、PMH情報が更新されません。

一覧 保険追加 上書き 取消

① 現在の公費・福祉(患者情報画面での設定内容)

患者情報画面で設定されている公費・福祉情報が表示されます。

※PMHにて取得した公費・福祉情報と差異がある場合、背景色がピンク色になります。

② PMHで取得した公費・福祉

PMHで取得した医療費助成情報が表示されます。

医療費助成情報を患者情報画面に反映したい場合は、「対象」欄にて該当の項目をクリックしてチェックを付けてください。

※患者情報画面に設定されている公費・福祉の負担者番号とPMHにて取得した公費・福祉の負担者番号が異なる場合、背景色がピンク色になります。

③【受給者証表示】

②の「対象」欄にてチェックを付けた場合、クリック可能になります。クリックすると「受給者証券面情報」画面(参照のみ)が表示されます。

<患者情報画面:【PMH】/【PMH(本日取込あり)】>

窓口業務 令和7年 05月 12日(月) 患者コード 999999999 資格 一般 2歳

国民健康保険 80% 6歳 初診日 令和7.4.4 担当医

患者情報 カルテ入力 公費 資格確認 給付率 80% 負担率 割

公費種別: 公費入力 福祉入力 マイナンバー

999999990 国民健康保険 家族

公費負担者番号 公費負担者の受給者番号

氏名 シカク 伊子ロウ 資格 一般 No. 139980

生年月日 昭和05年01月10日 性別 男

住所 茨城県 水戸市 水戸区 水戸1-1-1

公費負担者番号 公費受給者番号 期限 令和

福祉負担者番号 福祉受給者番号 期限 令和

PMH(本日取込あり)

カルテ1号用紙 保険付加情報 カルテ顔面入力 モモ 物品購入履歴

受給者証券面情報

取得日 最新: R07.05.01 最新マイナ資格確認日: R07.05.01 全て表示

83220004

受給者証券面情報

受給者証番号 乳幼児医療費助成

公費負担者番号 83220012

自立支援医療費受給者番号 123456

氏名 シカク 伊子ロウ

フリガナ 資格 一般

漢字 伊格 一郎

性別 男

生年月日 令和05年1月10日

住所 茨城県 水戸市 水戸区 水戸1-1-1

漢字 アイチケンピーシビマチイッチョウメ1-2 ビ

マンション101号室

被保険者証の記号及び番号 8市8町一丁目1番1号 Bマンション101号室

123456

保険者名 8市

病名 腎臓側弯症

患者情報画面へ反映


反映先 反映

現在値 負担者番号: 受給者番号: 期限:

反映元 負担者番号: 83220012 受給者番号: 123456 期限: R07.07.31

本日分のPMH(医療費助成)情報の登録がある場合【PMH(本日取込あり)】が表示されます。クリックすると、「受給者証券面情報画面」が表示されます。(画面説明は次ページへ)

※過去に取得したPMH(医療費助成)情報の場合、ボタン名称が【PMH】のみになります。

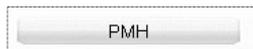

<受給者証券面情報画面>

取得日: [最新: R07.05.01] 最新マイナ資格確認日: R07.05.01 全て表示

83220012 21220009

受給者証券面情報	内容
受給者証名	乳幼児医療費助成
公費負担者番号	83220012
自立支援医療費受給者番号	123456
受診者	
氏名	
フリガナ	シカク イチロウ
漢字	資格 一郎
性別	男
生年月日	令和5年
住所	
フリガナ	アイチケンピーシビーマチイッチョウメ1-2 ビ
漢字	市B町一丁目1番1号 Bマンション101号室
被保険者証の記号及び番号	123456
保険者名	B市
病名	腎椎側弯症

患者情報画面へ反映

反映先: [福祉] 反映

現在値 負担者番号: 受給者番号: 期限:

反映後 負担者番号: 83220012 受給者番号: 123456 期限: R07.07.31

閉じる

1 取得日/最新マイナ資格確認日/全て表示

・取得日

医療費助成情報の取得日が表示されます。
「最新マイナ資格確認日」と同日の場合、選択肢の文言の先頭に「最新:」と表示されます。
※「最新マイナ資格確認日」に医療費助成情報がない場合は「最新:」は表示されません。
【▼】をクリックして過去の日付を選択すると過去の取得内容が表示されます。

・最新マイナ資格確認日

マイナンバーカード(顔認証カードリーダー)で資格確認を行った最新日が表示されます。

・全て表示

「資格情報比較画面」の「対象」欄で、チェックをしていない公費・福祉がある場合に表示されます。

「全て表示」にチェックを入れると、すべての公費・福祉(「資格情報比較画面」の「対象」欄で、チェックをした公費・福祉、チェックしなかった公費・福祉)が表示されます。

2 公費・福祉表示タブ

負担者番号単位でタブが表示されます。

3 受給者証券面情報表示エリア

2 にてクリックした負担者番号の受給者証の情報(券面情報)が表示されます。

4 患者情報画面へ反映

・反映先

【▼】をクリックして、患者情報画面の「第1公費」/「福祉」のどちらに反映するかを選択します。
※お客様の環境により「第1公費」/「第2公費」/「福祉」の選択肢が表示されます。

・現在値/反映後

現在値:
「反映先」にて選択された公費・福祉の患者情報画面で設定されている公費、福祉情報を表示します。

反映後:
3 に表示している公費・福祉の情報が表示されます。
「現在値」と「反映後」の各項目を比較し差異がある場合、背景色がピンク色になります。

・【反映】

クリックすると、患者情報画面の公費・福祉欄に負担者番号、受給者番号、期限が反映されます。

5 【閉じる】

受給者証券面情報画面を閉じます。



注意

医療費助成情報を取得しても、該当の福祉マスタの登録がない場合、患者情報画面には登録できません。(紙の受給者証運用時と同様です。)

※該当の福祉マスタが登録されていない状態で【反映】をクリックし、[Enter] を押すと「公費/福祉負担者番号が違います。」と表示されます。

「公費/福祉負担者番号が違います。」と表示された場合はメンテナンスのマスタメンテナンス画面-【福祉マスタ】にて取得した医療費助成情報の福祉マスタを登録してください。

● 操作・運用方法

以下手順にて、PMH(医療費助成)情報を取得後、患者情報画面に反映してください。



PMH(医療費助成)情報を取得するには、顔認証付きカードリーダーで医療費助成情報の提供に患者様が同意する必要があります。

顔認証付きカードリーダー画面イメージ

医療費助成の各種受給者証
を利用しますか？

利用する

利用しない

- 1 新患の場合: 患者情報画面にて、ファンクションの【新患】→【マイナンバー】をクリックします。
 既存患者の場合: 該当患者様を呼び出し、【マイナンバー】をクリックします。
- 2 「マイナンバー取得患者一覧画面」が表示されます。該当の患者様を選択して、【確定】をクリックしてください。



- 3 資格情報比較画面が表示されます。

◆画面上部にある「PMH」欄に「-」が表示されている(PMH(公費/福祉)の情報がない場合)

【保険情報】タブの内容を確認し、差異がある場合は、【保険追加】/【上書き】をクリック、
ない場合は【確定】をクリックしてください。以降の操作は通常のオンライン資格確認運用時と同様です。

◆画面上部にある「PMH」欄の背景がピンク色になっている(現在登録している公費/福祉情報と差異がある場合)
または「PMH」欄の背景がピンク色になっていないが、「●」が表示されている場合

【保険情報】タブの内容を確認後、【PMH】タブをクリックしてください。次ページへ



4 【PMH】タブに取得した医療費助成情報が表示されます。
「PMHで取得した公費・福祉」欄に表示されている公費・福祉にチェックをつけて、【保険追加】【上書き】をクリックします。

- ◆公費・福祉情報を保険追加して反映したい場合→【保険追加】をクリック
- ◆新患の場合、または現在登録されている内容に上書きしたい場合→【上書き】をクリック

注意 資格情報比較画面の【取消】はクリックしないでください。【取消】をクリックすると、同意情報およびPMHで取得した公費・福祉情報が更新されませんのでご注意ください。



「PMHで取得した公費・福祉」欄に表示されている公費・福祉の受給者証内容を確認したい場合は、【受給者証表示】をクリックしてください。
「受給者証券面情報」画面が表示されますので、確認したい負担者番号のタブをクリックしてください。

※この画面は参照のみとなります。
この情報を反映したい場合は、患者情報画面の【PMH】または【PMH(本日取込あり)】より取込を行ってください。(手順5へ)

5 患者情報画面に戻ります。
画面下の【PMH(本日取込あり)】または【PMH】をクリックします。

注意 この時点では、まだ「公費(福祉)負担者番号」「公費(福祉)受給者番号」「期限」は空欄です。必ず【PMH(本日取込あり)】または【PMH】で取込を行ってください。

- 6 「受給者証券面情報」画面が表示されます。
患者情報画面に反映したい負担者番号のタブをクリックして内容を確認します。

負担者番号	内容
83220012	乳幼児医療費助成制度
受給者証名	83220012
公費負担者番号	1234566
乳幼児医療費助成受給者番号	
受給者	
氏名	シカイチロウ
フリガナ	シカイチロウ
漢字	シカイチロウ
性別	男
生年月日	平成25年1月1日
住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
フリガナ	東京都千代田区千代田1-1-1
漢字	東京都千代田区千代田1-1-1
被保険者証の記号及び番号	123456
保険者名	市
病名	脳神経障害

HINT 受給者証券面情報画面のタブの番号と受給者証券面情報表示エリアの負担者番号は、同じ値が表示されますが、自治体の登録誤り等により異なる値となっている場合があります。その場合は、該当の受給者証を発行している自治体にお問い合わせ下さい。

- 7 「患者情報画面へ反映」欄にある、「反映先」の【▼】をクリックして反映先を選択します。

反映先 **福祉** ▼ 反映

現在値 負担者番号: 83220012 受給者番号: 123456 期限: R07.07.31

反映後 負担者番号: 83220012 受給者番号: 123456 期限: R07.07.31

- 8 「反映後」に、反映したい負担者番号等が表示されているか確認し、【反映】をクリックします。

反映先 福祉 ▼ **反映**

現在値 負担者番号: 83220012 受給者番号: 123456 期限: R07.07.31

反映後 負担者番号: 83220012 受給者番号: 123456 期限: R07.07.31

HINT 【反映】をクリックすると、患者情報画面に上書きされます。
保険追加して患者情報に登録したい場合は、「受給者証券面情報」画面の【閉じる】をクリックして、患者情報画面にて保険追加してから再度手順5より操作を行ってください。
※手順4にてすでに【保険追加】をクリックしている場合は、すでに保険追加されておりますので、そのまま【反映】をクリックしてください。

- 9 患者情報画面にて、PMHで取得した公費・福祉情報が表示されていることを確認し、キーボードの[Enter]を押し、【確定】をクリックしてください。
※該当の福祉マスタが複数ある場合、公費(福祉)負担者番号検索画面が表示されますので、福祉マスタを選択してください。

公費負担者番号: 83220012 福祉負担者番号: 123456 期限: 令和 07.07.31

HINT 「公費/福祉負担者番号が違います。」と表示された場合
PMHで取得した公費・福祉情報に該当する福祉マスタがない場合にこのメッセージが表示されます。
お手数ですがメンテナンスのマスタメンテナンス画面-【福祉マスタ】にて取得した医療費助成情報の福祉マスタを登録してください。
※歯科では使用不可の医療費助成情報も取得されます。受給者証券面項目を確認頂くなどお客様で使用可能か否かご判断頂く必要があります。(使用可能か不明な場合は必要に応じて自治体へご確認ください。)



公費/福祉の対象ではなくなった場合

公費/福祉の対象ではなくなった場合、【PMH】タブは表示されません。
また、「PMH」欄は「- (情報なし)」で表示されます。

項目	患者情報	資格情報	取込
1:カナ氏名	ヒロシ 一郎	ヒロシ 一郎	<input checked="" type="checkbox"/>
2:氏名	広島 一郎	広島 一郎	<input checked="" type="checkbox"/>
3:生年月日	平成27年12月22日	平成27年12月22日	<input checked="" type="checkbox"/>
4:性別	男	男	<input checked="" type="checkbox"/>
5:本人家族区分	家族	家族	<input checked="" type="checkbox"/>
6:負担率	3割	3割	<input checked="" type="checkbox"/>
7:郵便番号	731-3166	731-3166	<input checked="" type="checkbox"/>
8:住所	広島県広島市安佐南区大塚東1-1-1	広島県広島市安佐南区大塚東1-1-1	<input checked="" type="checkbox"/>
9:保険者番号	34340018	34340018	<input checked="" type="checkbox"/>
10:記号・番号・枝番	12・88-02	12・88-02	<input checked="" type="checkbox"/>
11:有効期限	令和 8年 3月31日	令和 8年 3月31日	<input checked="" type="checkbox"/>
12:資格取得日			<input checked="" type="checkbox"/>
13:被保険者氏名	広島 八郎	広島 八郎	<input checked="" type="checkbox"/>
14:所得区分			<input type="checkbox"/>
15:発行日			<input type="checkbox"/>
16:有効期限			<input type="checkbox"/>

取得した資格情報と一致しています。

公費/福祉の対象ではなくなった場合、以下の手順にて公費/福祉の受給者番号等を削除してください。

- ① 資格情報比較画面にて、【確定】をクリック
- ② 患者情報画面にて、【確定】をクリック
※公費/福祉の有効期限が切れている場合は、「期限」欄が赤くなります。

- ③ ファンクションの【保険追加(F5)]をクリック
- ④ 追加した保険側の公費/福祉の受給者番号等を削除して【確定】してください。

公費負担者番号	<input type="text"/>	公費受給者番号	<input type="text"/>	期限	令和
福祉負担者番号	<input type="text"/>	福祉受給者番号	<input type="text"/>	期限	令和



参考：福祉マスタ登録手順

「公費/福祉負担者番号が違います。」と表示された場合、取得した医療費助成情報の福祉マスタを登録してください。

例)以下の福祉マスタを登録する場合

重度心身障がい者医療制度(福祉医療番号:85) 月1000円 併用レセプト請求

- ①メインメニューの【メンテナンス】をクリック → 【マスタメンテナンス】をクリックします。
- ②対象年月入力画面にて対象年月をクリック→【福祉マスタ】をクリックします。
- ③福祉マスタメンテナンス画面が開きます。ファンクションの【追加】をクリックします。
- ④福祉マスタの設定画面が表示されます。下記の通り設定します。

★この設定値は参考例です。制度によって必要な値が異なる場合がありますので、ご利用の制度に合わせて適切な値を設定してください。

- ・福祉医療番号:85
- ・表示名称:85障がい者(1000円/月)
- ・受給者入力区分:あり
- ・算定区分:なし
- ・金・率区分:負担率
- ・会計制御区分:する
- ・請求区分フラグ:社保、国保とも公費
- ・患者負担上限額:1000円

【次画面】をクリック

・レセプト患者負担額端数印字(公費用):1円単位

【確定】をクリック

⑤福祉マスタメンテナンス画面に戻ります。【確定】をクリック

→「編集したデータを保存しますか?」と表示されますので、【はい】をクリックしてください。

PMH (医療費助成) 操作マニュアル

初版発行 2025年 6月30日

発行所

ウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社

落丁・乱丁本についてはお問い合わせください。
本書の内容は将来予告無しに変更することがあります。
本書の内容の一部または全部をウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社に無断で転記あるいは複製することは禁じます。
本書は内容について万全を期して制作致しましたが、万一記載に誤りや不完全な点がありましたら、弊社までご連絡ください。

Windowsは米国Microsoft社およびその他の国での商標もしくは登録商標です。
その他本書に登場する会社名、製品名、プログラム名などは、それぞれに各社の商標もしくは登録商標です。
なお、本文中には™および®マークなどは記載していません。
また、このマニュアルに記載されている医療機関名、個人名等は架空のものであり、実在する医療機関、個人等とは一切関係ありません。